

SENGER SENTIDA 7-I CONNECT



reddot design award
winner 2015

| Art.nr. | Beskrivelse |
|---------|-------------------------------|
| 628016 | Pleieseng Sentida 7-i Connect |



- ▶ Integret pasientvekt
- ▶ Vekt og pasientdata kan sendes fra sengen direkte til journalsystem
- ▶ Standard: Integret alarm for utstigning (standard)
- ▶ Tillegg: Alarm for fukt, bremseutløser, sengegrinder og høyde
- ▶ Integreerte alarmer kan kobles opp til sykesignalanlegg
- ▶ Multi Call-alarm gjør det mulig å differensiere og prioritere alarmer
- ▶ 7" berøringsskjerm til bruk for pleiepersonell
- ▶ Håndkontroll med bakgrunnsbelysning, lys i display og innebygd lykt
- ▶ Mobi-Lift støttegrep med bryter for høyderegulering
- ▶ Batteri-backup



Mål og vekt

| | | | |
|---------------|--------|--------------------|----------|
| Lengde | 218 cm | Høyde sengeflate | 28-80 cm |
| Bredde | 102 cm | Løfteevne (SWL) | 250 kg |
| Madrasslengde | 200 cm | Brukervekt | 215 kg |
| Madrassbredde | 85 cm | Frihøyde over gulv | 14 cm |

Integrert pasientvekt

- ▶ Integrert vekt i seng letter hverdagen for pleiepersonell
- ▶ Gir beboere en behagelig og verdig veieopplevelse
- ▶ Vekthistorikk kan vises i ukes- og månedsintervaller
- ▶ Resultatene kan sendes direkte til pasientjournal



Utstigning

- ▶ Fallforebyggende sengeflatehøyde på 28 cm
- ▶ Alarmsignal til pleiepersonell hvis pasient forlater sengen
- ▶ Fleksibel timer for utløsning av alarm
- ▶ Integrert nattlys som automatisk slås på når pasient går ut av sengen



Valgfrie alarmer utover utstigningsvarsling

- ▶ Alarm hvis brems frigjøres
- ▶ Alarm hvis «hev»- og «senk»-funksjon reguleres
- ▶ Alarm hvis sengegrind reguleres
- ▶ Alarm ved fukt




Fuktalarm

- ▶ Sensorer registrerer fuktighet i sengen
- ▶ Egnet for pasienter med lett inkontinens
- ▶ For bedre kontinens og verdighet for pasienter
- ▶ Forebygger trykksår



Mobi-Lift® for mer frihet

- ▶ Integrert støttegrep med bryter for høyderegulering
- ▶ Pasient kan enkelt ta i bruk Mobi-Lift
- ▶ Avlaster pleiepersonell
- ▶ Gjør brukere mer selvhjulpne

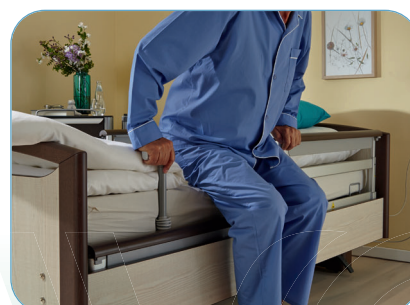

SENGER

KUNDETILPASSET DESIGN

Sengene kan leveres med kundetilpasset design hvor man har mulighet til å velge farge, type gavler og kontrastfarger. Memoriana fargekombinasjoner er spesielt godt egnet til demente. Fargevalgene og utformingen av gavler gir sengene et hjemmelig og pent uttrykk.

Sengen kan leveres med kundetilpasset design på bestilling og mot pristillegg. Ta kontakt for mer informasjon, så finner vi gode løsninger sammen.



Sentida med Memoriana-møbler, gavler type G, fargekombinasjon Havana Cherry og kontrastfarge Valnøtt.

Sentida med hotelldesign.

Tresorter



Krystallvit (U11026)



Magnolia (U11509)



Lønn (R27044)



Lindberg eik (R20021)



Nordisk teak (R50094)



Italiensk eik (R20286)



Alm natural (R37016)



Havana Cherry (R42006)



Bøk (R24006)



Varm bøk (R24034)



Valnøtt (R30135)

Memoriana-kombinasjoner



Nordisk teak | italiensk eik



Lønn | Alm natural



Havana Cherry | Valnøtt

Hotelldesign | Trekk til Df-gavler



Sand Mailo (1521)



Grå prikkete flint (8520)




Stein Mailo (8520)

SENGER

SENTIDA OG CARISMA – TILBEHØR

Sengeflateforlenger

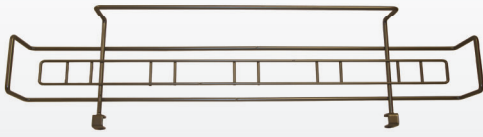

| Art.nr. | HMS nr. | Beskrivelse |
|---------|---------|-------------|
|---------|---------|-------------|

| | | |
|--------|--------|------------------------------------|
| 628148 | 253743 | Sengeflateforlenger 20 cm |
| 628149 | | Sengeflateforlenger 20 cm (B80 cm) |

Sengegrindforlenger til Sentida


| Art.nr. | Beskrivelse |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

| | |
|--------|-----------------------------------|
| 628146 | Sengegrindforlenger Sentida Bøk |
| 628147 | Sengegrindforlenger Sentida Cacao |
| 628154 | Sengegrindforlenger Sentida Eik |
| 628155 | Sengegrindforlenger Sentida Bjørk |



Sengegrindforhøyer (integret)

Passer til senger med integrerte sengegrinder

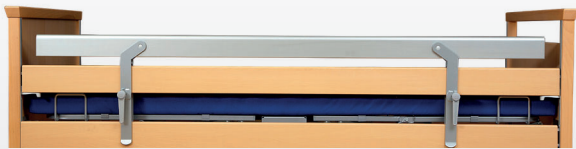

| Art.nr. | Beskrivelse |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

| | |
|--------|--------------------------|
| 628162 | Sengegrindforhøyer 10 cm |
|--------|--------------------------|

Sengegrindforhøyer (vertikaldelt)


Passer til senger med vertikaldelte sengegrinder



| Art.nr. | Beskrivelse |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

| | |
|--------|-------------------------|
| 628161 | Sengegrindforhøyer 6 cm |
|--------|-------------------------|

Løftebøyle

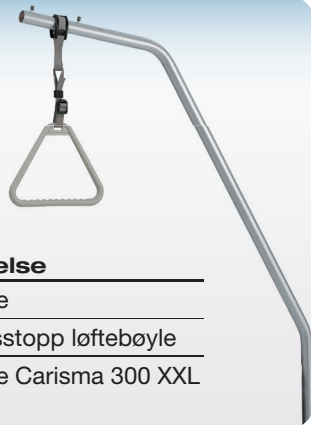

| Art.nr. | HMS nr. | Beskrivelse |
|---------|---------|-------------|
|---------|---------|-------------|

| | | |
|--------|--------|----------------------------|
| 628100 | 184585 | Løftebøyle |
| 628105 | 292111 | Rotasjonsstopp løftebøyle |
| 628106 | | Løftebøyle Carisma 300 XXL |

Infusjonsstativ

Med 4 kroker



| Art.nr. | Beskrivelse |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

| | |
|--------|-----------------|
| 628108 | Infusjonsstativ |
|--------|-----------------|

Fuktmatte



| Art.nr. | Beskrivelse |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

| | |
|--------|---------------------|
| 628180 | Fuktmatte |
| 628182 | Kabel til fuktmatte |

Sengetralle



| Art.nr. | Beskrivelse |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

| | |
|--------|-------------|
| 628160 | Sengetralle |
|--------|-------------|

Overtrekk vertikaldelt sengegrind



Leveres i stk.

| Art.nr. | HMS nr. | Beskrivelse |
|---------|---------|--------------|
| 628142 | 297890 | Til hodeende |
| 628143 | | Til fotende |

Overtrekk til senger med integrert sengegrind



| Art.nr. | Beskrivelse |
|---------|-----------------|
| 628140 | Sentida |
| 628139 | Carisma 300 XXL |

Beskyttelsesnett vertikaldelt sengegrind



Leveres i stk.

| Art.nr. | Beskrivelse |
|---------|--------------|
| 628144 | Til hodeende |
| 628145 | Til fotende |

Overtrekk gavl Sentida



| Art.nr. |
|---------|
| 628138 |

Fallmatte

Dimensjoner: 200 × 90 × 5 cm



| Art.nr. |
|---------|
| 628150 |

Sengestige



| Art.nr. | Beskrivelse |
|---------|-------------|
| 628120 | Sengestige |

Fender til Sentida 6 og 7-i

Med teleskopisk regulering



| Art.nr. | Beskrivelse |
|---------|-----------------|
| 628190 | Fender hodeende |
| 628192 | Fender side |

CareBoard®-beskyttelse til Sentida 7-i



| Art.nr. | Beskrivelse |
|---------|------------------------|
| 628265 | Beskyttelse CareBoard® |

SENGER

SENTIDA OG CARISMA – TILBEHØR

SafeLift håndkontroll

Passer på pleiesenger med vertikaldelte sengegrinder



| Art.nr. | Beskrivelse |
|---------|-----------------------|
| 628175 | SafeLift håndkontroll |

Mobi Stick 2

Ergonomisk utformet, gir stabilitet og sikkerhet. Kan felles ned.



| Art.nr. | Beskrivelse |
|---------|--------------|
| 628127 | Mobi Stick 2 |

Støttegrep



| Art.nr. | HMS nr. | Beskrivelse |
|---------|---------|-------------|
| 628125 | 231745 | Støttegrep |
| 628126 | 231746 | Holder |

Holder til håndkontroll




| Art.nr. | HMS nr. | Beskrivelse |
|---------|---------|---------------------------------|
| 628131 | 231743 | Holder til håndkontroll |
| 628133 | | Holder til ny håndkontroll |
| 628135 | 231744 | Adapter til holder (vertikal) |
| 628136 | | Adapter til holder (integreert) |

Nattlys under sengen



| Art.nr. | Beskrivelse |
|---------|---------------------|
| 628116 | Nattlys (Sentida 6) |
| 628117 | Nattlys (Movita) |

Sengelampe

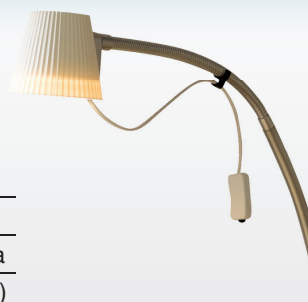

| Art.nr. | Beskrivelse |
|---------|-----------------------|
| 628111 | Soluna 12 V LED |
| 628113 | Omformer til Soluna |
| 628195 | Feste til Carisma (H) |
| 628196 | Feste til Carisma (V) |

Sengegrindforlenger til Sentida SC



| Art.nr. | Beskrivelse |
|---------|----------------------------------|
| 628158 | Sengegrindforlenger (Sentida SC) |

SafeSense 3




| Art.nr. | Beskrivelse |
|---------|----------------------------|
| 628166 | SafeSense 3 (integreert) |
| 628167 | SafeSense 3 (frittstående) |

Careturner

Careturner er et unikt og innovativt produkt utviklet for å kunne vende pasienter automatisk samt hjelpe pleiepersonalet med venderutiner. Careturner er enkel å montere og samarbeider med sengens funksjon. Brukervekt 165 kg.



Careturner er et av våre «to til en»-produkt! Ved å benytte «to til en»-produkt kan en pleier i mange tilfeller utføre pleie og stell hvor man tidligere måtte være to.

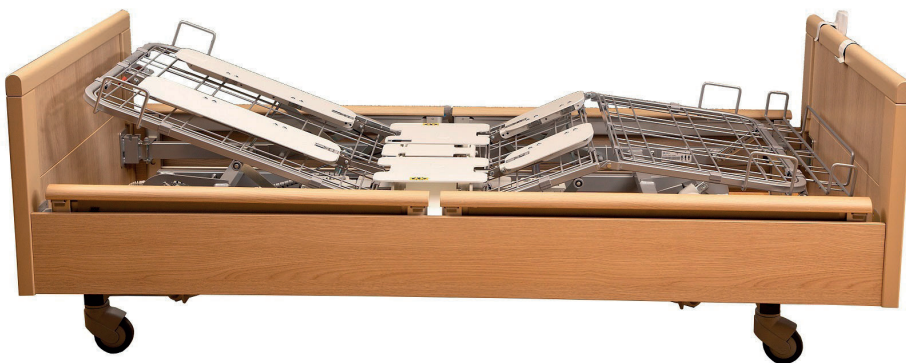

| Art.nr. | Beskrivelse |
|---------|---------------------------------|
| 628270 | Careturner til Sentida 6 |
| 628271 | Careturner til Sentida SC / 7-i |

Careturner egner seg for bruk til:

- ▶ Å forebygge utvikling av trykksår
- ▶ Skånsom vending av pasient
- ▶ Automatisk vending av pasient sparer ressurser
- ▶ Bedre komfort og mindre smerte
- ▶ Færre tunge løft og redusert slitasje på personalet

Careturner passer for:

- ▶ Pasienter på sykehjem, sykehus og hjemmepleie
- ▶ Pasienter med demens
- ▶ Pasienter i intensiv pleie

Manuell modus - Med håndkontrollen vendes pasienten til begge sider og pleiepersonalet avlastes for tunge og belastende oppgaver. I manuell modus kan vingene løftes opp til 80°.

Automatisk modus - Careturner har to programmer som kan individuelt tilpasses av pleiepersonalet. Den arbeider stille og uten vibrasjoner slik at pasienten kan sove uforstyrret.

Styring



«Hug & Cradle»-funksjon beroliger pasienten.