



Q700-UP F

Elektrisk rullestol med ståfunksjon

1.0 Oppdatert mars 2023



Q700-UP F

Delkontrakt 20 - Motorisert styring for begrenset utendørs bruk med elektrisk ståfunksjon - for voksne, 1. valg.



STÅFUNKSJON, UNIK SITTEKOMFORT OG GODE KJØREEGENSKAPER

- SEDEO PRO Advanced setesystem sikrer optimal stabilitet og komfort i sittende og stående stilling.
- Raske og allsidige tilpassingsmuligheter i seteenheten.
- Utrytt alle fordelene med å stå samtidig som du får en stol med gode kjøreegenskaper såvel ute som inne.
- Enkel betjening av ståfunksjon både fra bryter og joystick.
- Ideell på arbeidsplasser med variasjon mellom sittende og stående arbeid.

STANDARD KONFIGURASJON

- Forhjulsdreiv
- Elektrisk ståfunksjon, tilt, rygg, seteløft og benstøtter
- Godkjent kollisjonstest
- Hastighet, maks. 10 km/t
- Hodestøtte
- Lys, LED foran og bak
- Elektronikk: R-Net



TEKNISKE SPESIFIKASJONER Q700-UP F (KAN AVVIKE FRA NAV KONFIGURASJON)

Delkontrakt	DK 20	Delkontrakt	DK 20
Total lengde	Fra 127 cm	Hindertakning	8 cm
Total bredde	Fra 64 cm	Snuradius fra	74 cm
Setebredde	38-56 cm	Drivhjul	14"
Setedybde	40-54 cm	Svinghjul	9"
Setehøyde u/pute	45-78 cm	Totalvekt	Fra 133 kg
Setehøyde m/pute	56-89 cm	Maks. brukervekt	120 kg
Rygg høyde	56-76 cm	Maks hastighet	10 km/t
Ryggvinkel	85°-175°	Maks kjørelengde i hht ISO7176-4:2008	40 km*
Tilt	El. -0°-22°	Batteri	60Ah
Benstøttevinkling	Elektrisk	Batterilader	Impulse IP65
Dynamisk stabilitet	6°		

*) Følgende forhold vil ha en negativ innvirkning på kjørelengden: Batteristørrelse, hindringer, ulendt terreng, bruk av stolen i bakker, temperaturer under null grader, samt hyppig bruk av elektriske setefunksjoner.

Valg og opsjoner



Tekniske spesifikasjoner kan avvike fra NAV konfigurasjon. Se bestillingsskjema for komplett oversikt over mål og opsjoner.

ET LITE UTVALG LØSNINGER OG TILBEHØR



Standard



Scoot



Attende (Forus)


LEDSAGERSTYRING: Q700-UP F har god kjøreegonomi for ledsager. Velg fra et stort utvalg av ledsagerstyringer for ulike bruksområder og behov.



OMGIVELSESKONTROLL Styr dine omgivelser som mobiltelefon, døråpner, PC, lydanlegg, TV eller annet utstyr ved hjelp av blåtann eller IR direkte fra joystick eller bryterpanel på stolen.



DIREKTETASTATUR FOR SETEFUNKSJONER gir mulighet til å endre sittestilling samtidig som du kjører rullestolen. Eksempelvis ved behov for tilting av setet ved kjøring i hellende terreng.

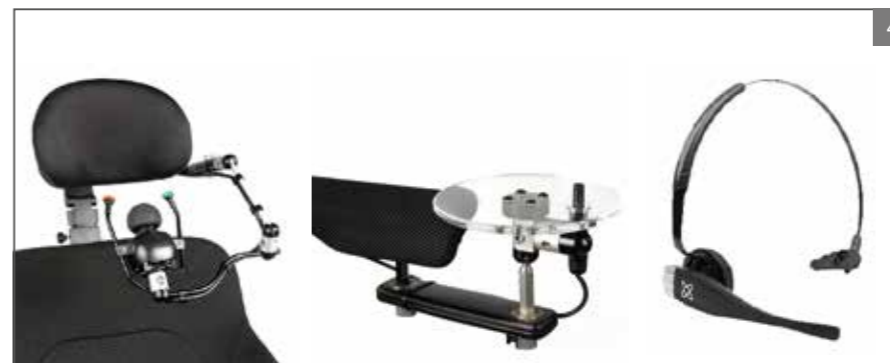

SPELALSTYRINGER: Stort utvalg alternative styringer for finger, hånd, arm, fot, hode, hake og munn kan enkelt monteres på stolen.



Bildet viser JAY Balance Cushion DC fluid som er godt egnet for bruk i elektriske rullestoler.

JAY sitteputer bidrar til stabilitet og posisjonering i sittende. Ønsker du å benytte JAY sitteputer, kan Q700-UP F utstyres med plansete.



WHITMYER: Komplet og anerkjent sortiment av hodestøtter for posisjonering og støtte av nakke og hode.



KINETIC BALANCE: Bredt spekter av funksjonelle posisjoneringsprodukter. Brukervennlig utforming for enkel bruk.

SEDEO PRO ADVANCED SETESYSTEM

God sitte- og kjørekomfort ute, inne og i bil.




STABILITET OG KOMFORT

- Med SEDEO PRO er det enkelt å oppnå riktig støtte i seteenheden for en trygg, god og kontrollert sitte- og kjørestilling.
- Godt utslag på tilt og ryggvinkelregulering gir mulighet for god hvilestilling der personen kan legge seg godt bakover og få full strekk i bena. Selv i hvilestilling gir armlenene god og komfortabel støtte.



ENKEL JUSTERING

- Med SEDEO PRO setesystem er det kort vei til en god sitte- og kjørestilling. De fleste innstillinger gjøres ved hjelp av ett verktøy - fem millimeter unbrakonøkkel - og kan utføres med personen sittende i stolen.

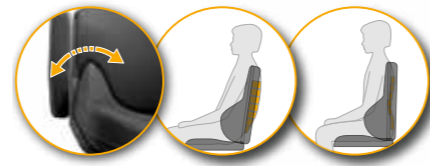

RYGG

SEDEO PRO Advanced ryggen er fleksibel og kan justeres etter ulike behov. Sidestøttene kan justeres individuelt og kan også justeres for asymmetri. Ryggen har borrelåsbånd for innstilling til ulike kurvaturer. Ryggens utforming og sidestabilitet kan stilles med personen sittende i stolen. Dersom behovene endrer seg er det enkelt å etter-tilpasse ryggen. Passer ikke standard ryggpute i SEDEO PRO sortimentet kan du velge mellom ryggputer med ulike utforming.



BRYSTBELTE

Bredt og godt polstret brystbelte gir stabilitet og trygghet i stående.

SETEPUTER

SEDEO PRO seteputer har en anatomisk form som gir stabilitet til sittestillingen gjennom god støtte til sete og lår. Formen, samt bruk av materialer, sørger for gode trykksårforebyggende egenskaper. Dersom du ikke finner riktig pute i vårt utvalg av SEDEO PRO seteputer, kan rullestolen leveres med plansete for bruk av andre seteputer.



HODESTØTTE

Hodestøtten gir støtte og stabilitet til hodet. Det myke, avtagbare trekket gir ytterligere komfort. Hodestøttene er tilgjengelig i to ulike utforminger/størrelser.



ARMLENER Armlenene gir god støtte til armene i alle posisjoner, også når ryggen er lagt tilbake. Armlenene kan justeres i høyde, vinkel samt i bredden for optimal avlastning av armene. Armlenepadsene kan stilles i dybde. Armlenene kan vippe opp for enklere forflytning og for eksempel tilgang til bord. Standard armlenepads har en beskyttende kant som skjermer armlenepaden mot skade. Andre armlenepads med annen utforming er tilgjengelig som tilbehør.



KNESTOPPERE Komfortable knestoppere som er enkle å ta av og på ved forflytning.

BENSTØTTER SEDEO PRO Advanced benstøttene er lengdekompenenserende og sikrer god støtte til bena i alle posisjoner.





IMPROVING
PEOPLE'S
LIVES[®]



VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Viken (HMS Øst-Viken)

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Viken (HMS Vest-Viken, inkl Asker)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 909 58 355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501
(Bærum)
markus.pettersen@sunrisemedical.no

Innlandet

Arnfinn Hellerud Tel. 918 89 260
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, nord

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord
Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale
salgsrepresentanter
hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.