



Magic 360

Elektrisk rullestol for utendørs bruk

1.0 Oppdatert mars 2023

magic
Mobility

Because the world's not flat

Elektrisk rullestol med motorisert
styring for utendørs bruk med
midthjulsdrift



Magic 360 DK11

MAGIC 360

Delkontrakt T1 - Elektrisk rullestol med motorisert styring for utendørs bruk med elektriske funksjoner - for barn, 3. valg.



DEN KOMPLETTE ELEKTRISKE RULLESTOLEN

- Magic 360 tar deg dit du vil - hele året. Den er suveren på alle underlag og ved alle kjøreforhold.
- God sitte- og kjørekomfort med elektriske setefunksjoner inkludert liggefunksjon og 30 cm seteløft.
- Enkel betjening og god kjøreergonomi for personen selv og ledsager.
- Det smale understellet sikrer at Magic 360 er enkel og smidig å manøvrere, også i trange omgivelser.
- Komplettilbehørsprogram.


TEKNISKE SPESIFIKASJONER MAGIC 360 (KAN AVVIKE FRA NAV KONFIGURASJON)

| Delkontrakt | DK T1 | Delkontrakt | DK T1 |
|---------------------|--------------|---------------------------------------|------------|
| Total lengde | Fra 98 cm | Hindertakning | 10 cm |
| Total bredde | Fra 61 cm | Snuradius fra | 62 cm |
| Setebredde | 30-56 cm | Drivhjul | 14" |
| Setedybde | 30-56 cm | Svinghjul | 7" |
| Setehøyde u/pute | 44-74 cm | Totalvekt | Fra 103 kg |
| Setehøyde m/pute | 53-83 cm | Maks. brukervekt | 160 kg |
| Seteløft | 30 cm | Maks hastighet | 10 km/t |
| Rygg høyde | 46-64 cm | Maks kjørelengde i hht ISO7176-4:2008 | 35 km* |
| Ryggvinkel | El. 94°-160° | Batteri | 73Ah |
| Tilt | El. 0°-50° | Batterilader | 10 Amp |
| Benstøttevinkling | Manuell | | |
| Dynamisk stabilitet | 10° | | |

*J Følgende forhold vil ha en negativ innvirkning på kjørelengden: Batteristørrelse, hindringer, ulendt terreng, bruk av stolen i bakker, temperaturer under null grader, samt hyppig bruk av elektriske setefunksjoner.

STANDARD KONFIGURASJON

- Midthjulsdrift
- Elektrisk tilt, rygg og seteheis
- Godkjent kollisjonstest
- Hastighet 10 km/t
- Hodestøtte
- Lys, LED foran og bak

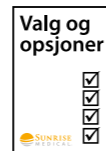

Tekniske spesifikasjoner kan avvike fra NAV konfigurasjon. Se bestillingsskjema for komplett oversikt over mål og opsjoner.

ET LITE UTVALG LØSNINGER OG TILBEHØR



LEDSAGERSTYRING: Magic 360 har god kjøreergonomi for ledsager. Velg fra et stort utvalg av ledsagerstyringer for ulike bruksområder og behov.



OMGIVELSESKONTROLL Styr dine omgivelser som mobiltelefon, døråpner, PC, lydanlegg, TV eller annet utstyr ved hjelp av blåtann eller IR direkte fra joystick eller bryterpanel på stolen.



DIREKTETASTATUR FOR SETEFUNKSJONER gir mulighet til å endre sittestilling samtidig som du kjører rullestolen. Eksempelvis ved behov for tilting av setet ved kjøring i hellende terreng.



SPESIALSTYRINGER: Stort utvalg styringer for finger, hånd, arm, fot, hode, hake og munn som enkelt kan monteres på stolen.



Bildet viser JAY Balance Cushion DC Fluid som er godt egnet for bruk i elektriske rullestoler.

JAY sitteputer bidrar til stabilitet og posisjonering i sittende.



WHITMYER: Komplette og anerkjente sortiment av hodestøtter for posisjonering og støtte av nakke og hode.



KINETIC BALANCE: posisjoneringsprodukter med unike egenskaper. Brukervennlig utforming for enkel bruk.



STABILITET OG KOMFORT PÅ ALLE UNDERLAG



- Alle elektriske funksjoner.
- Med Rehab seteløsning tilpasset behov og bruk er det enkelt å oppnå riktig støtte i seteenheten for en trygg, god og kontrollert sitte- og kjørestilling.

RYGG
De store, integrerte sidestøttene sikrer god stabilitet i ryggen

I ØYEHØYDE MED LIVET



Seteløft på 30 cm gir økt rekkevidde i hverdagen.

PERFEKT I TRANGE OMGIVELSER
Med midthjulsdrift og en totalbredde på kun 66 cm er Magic 360 mer en kompakt nok til å ferdes innendørs på offentlig transport, kafeer, hjemme eller på arbeid.



HODESTØTTE
Hodestøtten gir støtte og stabilitet til hodet. Det myke trekket gir ytterligere komfort.

ARMLENER Armlenene gir god støtte til armene i alle posisjoner, også når ryggen er lagt tilbake. Armlenene kan justeres i høyde, vinkel samt i bredden for optimal avlastning av armene. Armlenepadsene kan stilles i dybde.



Armlenene kan vippes opp for enklere forflytning og for eksempel tilgang til bord. Standard armlenepads har en beskyttende kant som skjermer armlenepaden mot skade.

BENSTØTTE Den sentermonterte benstøtten bidrar til god stabilitet ved kjøring og hvile. Kantene på fotplaten holder føttene på plass.

FRAMKOMMELIGHET



Magic 360 tar seg godt over kanter på 10 cm.



IMPROVING
PEOPLE'S
LIVES[®]

VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Viken (HMS Øst-Viken)

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Viken (HMS Vest-Viken, inkl Asker)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 909 58 355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501
(Bærum)
markus.pettersen@sunrisemedical.no

Innlandet

Arnfinn Hellerud Tel. 918 89 260
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, nord

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord
Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale
salgsrepresentanter
hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.