



Jeden Tag ein bisschen glücklicher.
REWE

EFEKTION^{NO}

LIFT activ mekanisk

SÅ FLEKSIBEL SOM NØDVENDIG. PÅ JOBB- OG I HVERDAGEN.

LIFT activ TAR DEG TIL RIKTIG NIVÅ. PÅ JOBBEN OG I HVERDAGEN

Takket være den lave vekten er LIFT activ ideell for transport og daglig bruk, både på jobb- og ellers. Nå kan du forsyne deg fra øverste hylle- du kan sette på plass oppvasken i veggskapet, du ser hva som er på benken- og man får også hente det beste fra krydderhylla. Men det beste; man kan ha dialog og samtaler på samme nivå? LIFT activ kan ta deg til nye høyder...

FLEKSIBELT ALTERNATIV FOR BRUK – HJELPEMIDDEL FOR Å STÅ OPPREIST

For folk hvis tilstander gir dem litt bevegelse i bena, kan LIFT activ kan også brukes som ståhjelp. For denne bruken er det fornuftig å velge delt og svingbar fotstøtte, eller fotstøtte som kan slås sammen.

ALTERNATIV: AVTAGBAR FRONT/STAMME

Stammen kan svinges ut og fjernes, slik at rammen ender i front av stolen, og dermed gir maksimal plass til forflytning/overføring.



FOTHVILERE KAN ENKELT FJERNES

LIFT activ

LIFT activ fra Efehton er utstyrt med manuell setehøydejustering, som enkelt justeres ved hjelp av et håndtak. Med bare litt muskelkraft heves setet med opptil 30 cm. I denne posisjonen er rullestolbrukeren "øye til øye" med en person som er ca. 1,75 m høy.

Den trinnløst justerbare setehøyden gjør den svært fleksibel i bruk både i yrkeslivet- og i det daglige.

Som ansatt og rullestolbruker kan man med høydejusteringen lettere utføre arbeidsoppgaver i høyden, det blir enklere å betjene forskjellige arbeidsstasjoner, maskiner og annet som man vanskelig når i en konvensjonell rullestol.



LETT OG AKTIV PÅ TROSS AV

Selv med innovativ og funksjonell mekanisme for hev- og senkefunksjon, har LIFT activ fra Efehton kun en vekt som starter på 14,5 kg.




ENKEL TRANSPORT

Transport i bagasjerom er problemfritt - bare ta rullestolen fra hverandre i sine individuelle moduler, uten behov for verktøy.



BREDT UTVALG AV EKSTRAUTSTYR OG TILBEHØR

Hver LIFT activ fra Efehton er tilpasset den enkelte bruker, med rammemål og utstyr som er tilpasset brukerens behov. Du kan velge fra et bredt spekter av utstyr for LIFT activ; fot-støtter, bremses, kjørehåndtak, rygg- og setesystemer, samt driv- og styrehjul.

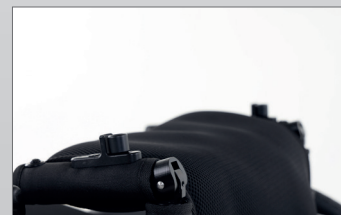

RYGGSTØTTE MED LEDDET HÅNDGREP.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Frontramme, legg	U eller V-form
Frontramme, vinkel	100° / 105°
Setehøyde-justering	Trinnløst justerbar, 30 cm. (Manuelt)
Sete, bredde	35 – 46 cm (1 cm. intervall)
Sete, dybde	35 – 48 cm (1 cm. intervall)
Rygg, høyde	20 – 48 cm (1 cm. intervall)
Rammelengde, front/legg	30 – 50 cm (1 cm. intervall)
Sete, høyde i bakkant	41 – 43 cm (1 cm. intervall)
Sete, høyde i framkant	45 – 51 cm (1 cm. intervall)
Tippepunkt	6 – 10 cm (1 cm. intervall)
Egenvekt på stol, fra	14,5 kg.
Brukervekt, maksimalt/ opp til	100 kg.
Camber, drivhjul	1°, 4°, 2,5°