



Etac Cross 6

Den mest tilpasningsdyktige
allroundstolen på markedet

 **etac**[®]

Etac Cross 6

De enkle justeringene sparer tid og energi. Bruk tiden på å finjustere innstillingene og forbedre bevegeligheten på stolen, slik at den tilpasses brukeren optimalt.

Den mest tilpasningsdyktige allroundrullestolen på markedet!

Den multijusterbare ryggstøtten, den unike rammekonstruksjonen og det brede utvalget av tilbehør, garanterer hver bruker en rullestol med best mulig sittekomfort og kjøreegenskaper.

Cross 6 – enda enklere justeringer

Å justere Cross 6 er enkelt og krever svært få verktøy. Alt du trenger å gjøre er å velge riktig setebredde *. Alt annet kan tilpasses hver enkelt brukers behov.


Det nye 3A-ryggstøtten er designet for å være enklere og raskere å justere når brukeren sitter i stolen. Den allerede laveste setehøyden på markedet er nå blitt enda lavere og enklere å justere.

* For de fleste brukere kan kort ramme brukes. For brukere som er lengre enn 190 cm, eller som er 185 cm og har ryggkomplikasjoner, bør et langt understell vurderes.



Cross 6 vist som standard

Detaljer

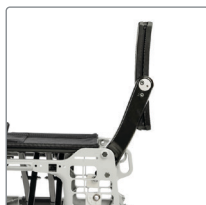

Enklere justering av 3A-ryggstøtte

Kombinasjonen av justeringer av vinkel og høyde skaper de beste forutsetningene for overkroppsstøtte og stabilitet. 3A-ryggstøtten har forbedret funksjon og er nå enda enklere å justere.




AirMesh - pustende ryggtrekk

Cross 6 kommer i standard med et behagelig, pustende ryggtrekk.



Kryssramme med god stabilitet

Cross 6 har en kryssramme i ny utforming med samme stabilitet som en fast ramme. Den nye rammen sikrer lang produktlevetid og de beste kjøreegenskapene.

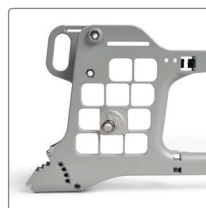

Enda lavere sittehøyde

Montering av et 20" drivhjul i den øvre raden gir en setehøyde på 32 cm.

Cross 6 som standard

Ramme	Støpt aluminium, sammenleggbar med doble kryss
Rammefarge	Grå
Ryggstøtte	3A-rygg, høyde- og vinkelregulerbar, 35-45 cm (40 cm standard)
Tverrstag rygg	Gir ekstra stabilitet
Kjørehåndtak	Høyderegulerbare og avtagbare
Velcroygg	35-45 cm
Ryggtrekk	AirMesh (pustende)
Ryggvinkel	Regulerbar, Regulerbar, -5° - +20° (standard +2° i ryggvinkel og 7° lumbalvinkel)
Setetrekk	Dybderegulerbart
Seteforlenger bak	Standard, montert bak setetrekket
Setehøyde foran	47 cm
Armstøtter	Høyderegulerbare med langt fast polster, 38cm. Med klesbeskytter
Benstøtter	Åpen vinkel, sort
Fotplater	Delte, oppfellbare, vinkel- og dybderegulerbare
Brems	Med vinklet rødt håndtak
Drivhjul	24", med quickrelease
Dekk	Massive/kompakte
Drivringer	Aluminium
Camber	2°
Drivhjulsinnfesting	D4
Svinghjul	6", massive
Gaffel	Medium, med stålaksling
Gaffelhusfeste	Standard, høyde- og vinkeljusterbart
Tippesikring	Oppfellbar, teleskop, 2 stk



Cross 6 funksjoner og forbedringer

Ny 3A rygg

Enda bedre og intuitiv tilpasning. Skaper god overkroppsstøtte og stabilitet

Velcroygg

Med overdrag i pustende Airmesh

Posisjoneringsbelte

Forbedret montering for posisjoneringsbeltet.

Armstøtte

Armlener i to horisontale posisjoner

Integrert seteforlenger

Integrering av beslag for forlengelse av sete og bakre transportfeste.

Beskyttelse

For fotfremdrift (benstøtten erstattes av en myk, formet plugg)

Tippepunkt

Flere innstillingsmuligheter for balanse (44). Økt justerbar sittehøyde: 32–53 cm.


Kryssramme

Forsterket ramme-kryss som tåler en brukervekt opptil 135 kg

Brakett

Samme brakett for innstilling av alle setehøyder. Enda lavere minste setehøyde (32 cm)



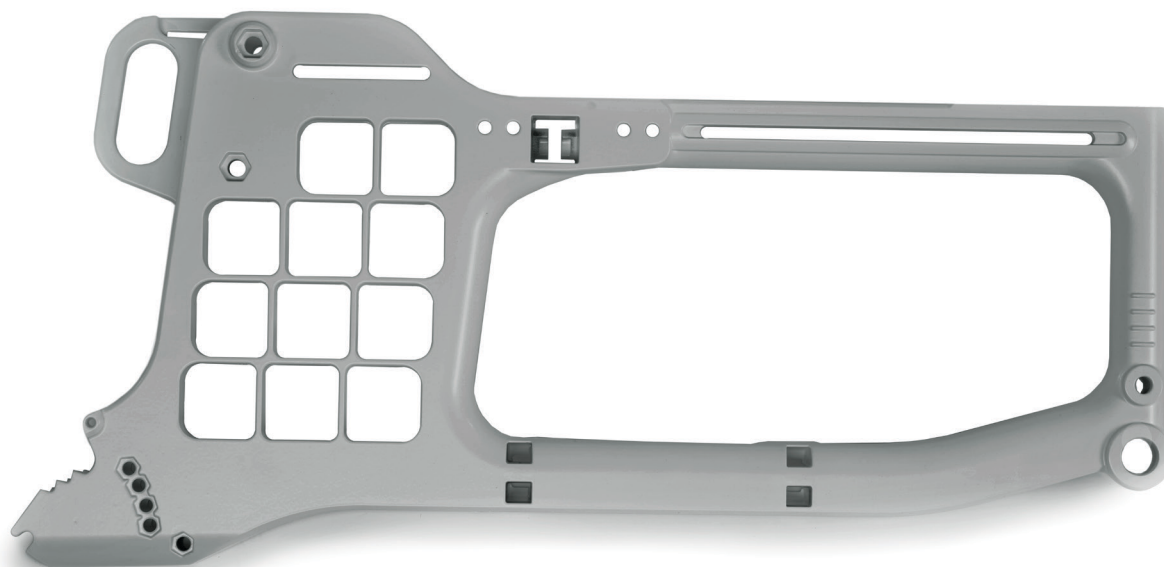

44 mulige drivhjulstillinger tillater en setehøyde på 32-53 cm.

Forskyvningen av drivhjulets posisjoner gir optimale kjøreegenskaper i forhold til ønsket setehøyde.

Cross 6 garanterer den perfekte kombinasjonen av balanse og kjøring.

Cross 6 sittebredde	Artikkelnummer	HMS nr.	Totalbredde	Sittedybde fra ryggstøtterør*	Vekt med drivhjul
35 cm kort	13246001	278331	55,5 cm	35-49,5 cm	14,6 kg
35 cm lang	13246002	278332	55,5 cm	41-55,5 cm	14,8 kg
37,5 cm kort	13246003	278333	58 cm	35-49,5 cm	14,7 kg
37,5 cm lang	13246004	278334	58 cm	41-55,5 cm	14,9 kg
40 cm kort	13246005	278335	60,5 cm	35-49,5 cm	14,8 kg
40 cm lang	13246006	278336	60,5 cm	41-55,5 cm	15,0 kg
42,5 cm kort	13246007	278337	63 cm	35-49,5 cm	14,9 kg
42,5 cm lang	13246008	278338	63 cm	41-55,5 cm	15,1 kg
45 cm kort	13246009	278339	65,5 cm	35-49,5 cm	15,1 kg
45 cm lang	13246010	278340	65,5 cm	41-55,5 cm	15,3 kg
47,5 cm kort	13246011	278341	68 cm	35-49,5 cm	15,2 kg
47,5 cm lang	13246012	278342	68 cm	41-55,5 cm	15,4 kg
50 cm kort	13246013	278343	70,5 cm	35-49,5 cm	15,3 kg
50 cm lang	13246014	278344	70,5 cm	41-55,5 cm	15,5 kg
52,5 cm kort	13246015	278345	73 cm	35-49,5 cm	15,4 kg
52,5 cm lang	13246016	278346	73 cm	41-55,5 cm	15,6 kg

*Målt med Cross 3A Triangulær rygg
 Vekter gjelder stol med 24" drivhjul med hurtigkoblingsnav, massive/kompakte dekk, drivringer i aluminium, benstøtter, fotplate, brems, armstøtte, 6" svinghjul og medium gaffel. Oppgitte mål kan variere med ± 2 %.

Setehøyde foran 32-56,5 cm	Høyde ryggstøtte 32-45 cm Gjelder Cross 3A ryggstøtte (standard)	Drivhjul 20", 22", 24" og 26"
Setehøyde bak 32-53 cm	38-51 cm Gjelder Cross 3A ryggstøtte høy	Maks brukervekt 135 kg

Tilbehør




Hodestøtte, velour

Høyde-, dybde- og vinkeljusterbar hodestøttestang. Hodestøttepute leveres nå med avtagbart trekk og mulighet for sideveis justering. Trekk mørk grå velour.




Hodestøtte, hygiene

Høyde-, dybde- og vinkeljusterbar hodestøttestang. Hodestøttepute leveres nå med avtagbart trekk og mulighet for sideveis justering. Grått hygienetrekk.

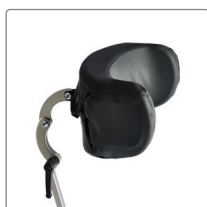

Hodestøtte med sidestøtte

Regulerbart i høyde, dybde, vinkel og sideveis. Avtagbart og vaskbart. Kombineres med hodestøttefeste som kjøpes separat. Trekk: Grå hygiene.

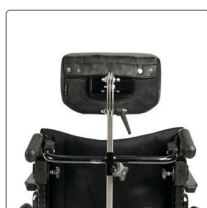

Hodestøttefeste

Avtagbart med hurtiglås.



Justerbar velcroygg, mod. 3A (std)

Trekket har seks justerbare borrelåser. Det øverste er bredere, noe som gir økt komfort og stabilitet. Finnes i standard-, og høy utgave



3A-rygg, komplett (std)

Leveres i standard utgave (32-45 cm), og høy utgave (38-51 cm). Kan justeres både i hofteledd og lumbalvinkel for presis tilpasning.



Ryggoverdrag

Mykt, elastisk overdrag. Mørk grå velour.



Komfortoverdrag

Med ekstra tykk polstring. Mørk grå velour. Leveres til standard-, og høy rygg.




Hygienetrekk til 3A-rygg

Hygienetrekk til 3A-rygg. Materiale: Dartex. Vannavvisende, kan tørkes av med en fuktig klut. Vaskes på 90°C. Kan merkes med kundespesifikk brodert logo.




Pustende trekk (std)

Pustende trekk i Airmesh som gir et moderne og rent uttrykk. Kan brukes med 2B rygg (lav og høy) og 3A rygg (kun standard).

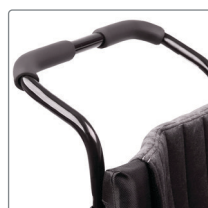

Kjørebøyle

Høyderegulerbar og avtagbar. Må brukes for innfesting av hodestøtte. Oppgitte mål gjelder ved bruk av 3A-rygg. Ved bruk av Cross 2-rygg benyttes 2,5 cm bredere kjørebøyle.

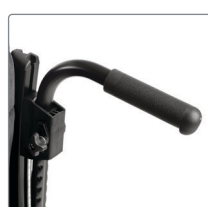

Kjørehåndtak (std)

Høyderegulerbare og avtagbare. Leveres i stk.



Faste kjørehåndtak

Diskret design, avtagbare. Alternative kjørehåndtak til 3A-ryggen.



Tverrstag rygg

Gir ekstra stabilitet. Nedfellbar med hurtiglås på den ene siden. Monteres direkte i 3A-rygg og er dermed uavhengig av høyden på kjørehåndtakene.

For oversikt over artikkelnummer/ HMS nr. på tilbehør og reservedeler, se bakerst i produktarket

Tilbehør



Ryggkile

Myk skumkile som festes med borrelås under ryggoverdraget. Kommer i to størrelser: Høyde 15 cm eller 30 cm. Kombineres med en eller flere sidestopp rett eller sidestopp vinklet for økt utvendig støtte. Trekk i mørk grå velour.



Sidepute

Monteres med borrelås mellom ryggtrekk og ryggoverdrag. Kombineres med rett sidestopp for utvendig støtte. Sideputen gir økt sidestabilitet.



Sidestøtte, regulerbar og avtagbar

Muligheten for en kroppsnær sidestøtte som ikke begrenser armebevegelsen. Puten kan roteres til ulike kroppsformer og justeres i dybde og høyde. Kan monteres og demonteres uten bruk av verktøy.



Sidestopp, rett

Kombineres med sidepute rygg eller kan brukes for å holde en ryggkile på plass. Monteres i ryggskinnen og plasseres i ønsket høyde og dybde.




Sidestøtte, svingbar

Puten er svakt buet og kan roteres for å tilpasses ulike kroppsformer. Høyde- og dybdejusterbar. Utsvingbar med et enkelt knappetrykk. I utsvingt posisjon kan armstøtten enkelt håndteres uten å kolliderer med sidestøttefestet.



Sidestopp, vinklet, 15 mm (small)

Øker ryggbredden med 15 mm på hver side. Kombiner gjerne med et bredere ryggoverdrag eller en ryggkile. Stk.

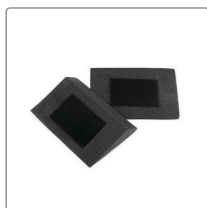

Komfortkile, modell 1 (small)

Par. Komfortkilen kan kombineres med flere kiler og tilpasses ønsket passform. Primært til bruk for økt bolstabilitet. Komfortkilen kan monteres direkte under ryggoverdraget. L: 13 cm, B: 9.5 cm, H: 2 cm



Sidestopp, vinklet, 30 mm (large)

Øker ryggbredden med 30 mm på hver side. Kombiner gjerne med et bredere ryggoverdrag eller en ryggkile. Stk.



Komfortkile, modell 2 (medium)

Par. Komfortkilen kan kombineres med flere kiler og tilpasses ønsket passform. Primært til bruk for økt bolstabilitet. Komfortkilen kan legges direkte under ryggoverdraget. L: 19 cm, B: 12 cm, H: 2 cm



Armlener. Høydejusterbar m/ fingerskrue (std)

Avtagbar, og høydejusterbar med fingerskrue. Kan også låses fast på rullestolen. Inkl. klesbeskytter. Kort (25 cm), alternativt lang (38 cm) armlenepute. Alternativ: høydejusterbar m/ unbraco.



Komfortkile, modell 3 (large)

Par. Komfortkilen kan kombineres med flere kiler og tilpasses ønsket passform. Primært til bruk for økt bolstabilitet. Komfortkilen kan legges direkte under ryggoverdraget. L: 20 cm, B: 17 cm, H: 2.5 cm



Armlenepolster med overdrag

Polstret med skum eller gel. Avtagbart. Finnes i kort (25 cm) og lang (38 cm) modell. Trekk i mørk grå velour, alternativt sort Dartex.



Trykkfordeler

Enkelt verktøy for en perfekt form. L: 20 cm, B: 15 cm, Høyde: 1 cm



Armstøttepute bred og myk

Monteres på eksisterende armstøtte. Størrelse 8 x 40 cm. Passer både kort og lang armstøtte, høyre og venstre side.

For oversikt over artikkelnummer/ HMS nr. på tilbehør og reservedeler, se bakerst i produktarket

Tilbehør



Hemiplegiarmlene

Vinkeljusterbart. Høyden innstilles med justering av armlenet. Monteres på lang armlenepute. Polstret avtagbart trekk i mørk grå velour.



Klesbeskytter

Avtagbar og justerbar i høyden.




Lårstøtte

Finnes i kort (50 cm) og lang (57 cm) modell. Monteres på eksisterende armstøtte.



Polster til lårstøtte

Polster i myk PU montert på innside av lårstøtten med velcro.

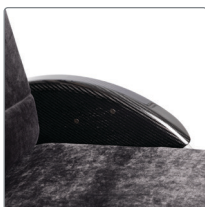

Skvettskjerm i karbonfiber

Justerbar i høyde, dybde og vinkel.



Benstøtte (std)

Sort. Avtagbar og sidesvingbar. Finnes også med lås. Legglengde 35-52 cm med standard fotplate. NB! Fotplate bestilles separat



Benstøtter m/ spiss vinkel (80°). Std og kort lengde, med og uten lås.

Med spiss vinkel kommer fotstøttene ca. 6 cm nærmere setet. NB! Fotstøtte bestilles separat. Stk.



Vinkelregulerbar benstøtte modell 1, stk

Kombineres med leggstøtte i myk velour som kan reguleres i høyde, dybde, vinkel og sideveis. Fotplate, putekonsoll og leggstøtte bestilles separat.



Vinkelregulerbar benstøtte, modell 3 med leggstøtte

Med skålformet, oppfellbar leggstøtte som kan justeres i to dybder på benstøtterøret. Legglengde 41-55,5 cm. Legglengde i vannrett stilling 49-63,5 cm. NB! Fotplate bestilles separat.



Vinkelregulerbar benstøtte

Utsvingbare og avtakbare. Med oppfellbare leggstøtter, justerbare i høyde og dybde.

Trekk: Hygiene



Overdrag leggstøtte

Til vinkelregulerbar benstøtte, modell 3. Overdrag i mørk grå velour, alternativt sort Dartex.



Fotplater, standard lengde, stk (std)

Oppfellbare. Justerbare i dybde og vinkel, regulerbare i høyden. Leveres med standard innfestningsrør. Finnes også med korte (-8 cm) eller lange (+10 cm) innfestningsrør.



Polstring, delt fotplate

For ekstra komfort. Velour.



Hel fotplate

Oppfellbar sideveis og stillbar i høyde og vinkel.

For oversikt over artikkelnummer/ HMS nr. på tilbehør og reservedeler, se bakerst i produktarket

Tilbehør



Polstring, hel fotplate Cross

For ekstra komfort. Velour.



Hælbånd

Regulerbar lengde. Passer både høyre og venstre side. Kan ikke kombineres med utvidet fotstøtte.



Hel fotplate, smal modell, stk

Justerbar i høyde og dybde. Regulerbar i vinkel. Finnes til setebredde 35 og 37,5 cm. Avtagbar.



Amputasjonsbenstøtte, stk

Justerbar i høyde, dybde, vinkel og sideveis. Passer både venstre og høyre side. Trekk: Mørk grå velour eller sort Dartex.



Fotplateforlenger til delt fotplate, stk

Øker dybden med 8 cm. Monteres på eksisterende fotplate.



Amputasjonsvekt

Motvirker tippfare og forbedrer kjøreegenskapene. Avtagbar og vinkelregulerbar. Vekt: 3 Kg



Breddet fotplate

Monteres på den eksisterende fotplaten. Passer till setebredde 52,5–60 cm.




Drivhjul

20", 22", 24" og 26" med standard felg, samt 24" lavvektshjul med karbon nav. Velg mellom ulike dekk; massive, luft- eller høytrykk.



Leggbånd

Avtagbart, regulerbart i lengde.

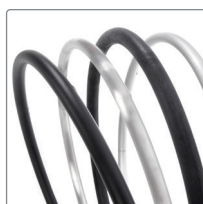

Drivringer

Velg mellom plastbelagte, cellegummi, aluminium, titan og rustfrie.



Polstring til leggbånd

Gir en mykere støtte for leggene. Finnes i 20, 30 og 40 cm lengde.



Enhåndsdrift

Passer både høyre og venstre side. Kan ikke kombineres med ledsagerbrems.



Leggbånd, komfort

For ekstra komfort. Justerbar med borrelås. Velour. Monteres på faste eller vinkelstillbare benstøtter.



Svinghjul

4", 5", 6.5" eller 8".

For oversikt over artikkelnummer/ HMS nr. på tilbehør og reservedeler, se bakerst i produktarket

Tilbehør



Loddeverktøy for svinghjul

For lodding av hjul.



Ledsagerbrems

Komplett ledsagerbrems består av monteringskit, wire og kjørehåndtak. 75 mm mellom grep og spak.




Cambervinkel

Standard 2°, alternativt 0°.



Ledsagerbrems

100 mm mellom grep og spak.

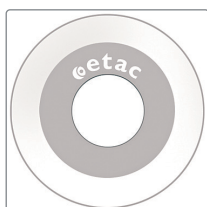

Eikebeskytter

Grå.




Plansete

Avtagbart. Kompletteres med passende sittepute. Lavmontert.



Brems med vinklet bremsehåndtak

Gir større gripeflate. Avtagbart tverrgrep. Farge: rød (std) eller sort.

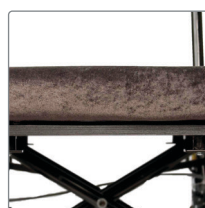

Høy montering, plansete

Tilbehørssett for å få plansetet i samme høyde som seterørene.



Deksel

Beskyttelse når ikke benstøtter er i bruk.




Setepute

52 cm lang. Anatomisk formet sittepute som kuttes til innstilt setedybde. Trekk: mørk grå velour.



Brems med bremsepakforlenger

Bremsespaken kan vinkles fremover, for å lette sideforflytning.

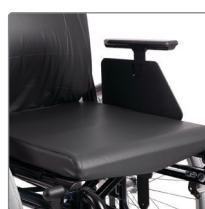

Setepute, Tidy

Med vannavstøtende hygienetrekk i sort Dartex. 46 cm lang (SB 35–40 cm) 50 cm lang (SB 42.5–60 cm)



Enhåndsbrems

Til høyre eller venstre side. Kan kombineres med ledsagerbrems.



Seteforlenger (std)

Festes med borrelås mellom transportfestene. Øker setedybden med opp til 7 cm.

For oversikt over artikkelnummer/ HMS nr. på tilbehør og reservedeler, se bakerst i produktarket

Tilbehør




Teleskoperte tippesikringer

Oppfellbare, justerbar høyde og regulerbare i lengde og vinkel. Passer alle setehøyder.



Feste brystsele

For øvre innfesting av brystsele. Montert på stang for hodestøtte.

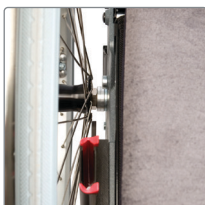

Breddeøkningsett drivhjul

Øker avstanden mellom armstøttene med 1 cm. Totalbredden øker også 1 cm. Kan ikke kombineres med ledsagerbrems.



Hoftebelte

Med hurtiglås, justerbare lengder. Hoftebelte: To alternative festepunkter på rammen.



Breddet framgaffelfeste

Flytter svinghjulet 3 cm ut, stolens totalbredde påvirkes ikke.



Krykkeholder

Dobbel, monteres på tippesikring.



Framgaffelfeste kort

Til 4" og 5" svinghjul. Gir mulighet for setehøyde ned til 34 cm.



Infusjonsholder

Komplett med feste



Bord

Transparent. Monteres på lange armstøtter.



Verktøysett

Komplett.



Hemibord

Bord inkl. armstøtteputer med påmontert velcro. Finnes til både korte og lange armstøtter, opp til 50 cm setebredde.

Rammefarge



Grå - 78 - Standard

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
219976	Aksel benstøtte amputasjon mrs Crissy Swing Away/Cross 6 kompl	25519-01
154237	Amputasjonsvekt 3kg mrs Crissy Swing Away/Cross 6 kompl	26876
016124	Armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hemi hø	25770-60-1
016125	Armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hemi ve	25770-60-2
278523	Armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 l25 h20-25 aktiv hø	28578-1
278524	Armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 l25 h20-25 aktiv ve	28578-2
004390	Armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 l25 kort hø	25172-1
004391	Armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 l25 kort ve	25172-2
278525	Armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 l38 h20-25 aktiv hø	28579-1
278526	Armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 l38 h20-25 aktiv ve	28579-2
004392	Armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 l38 lang hø	25173-1
004393	Armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 l38 lang ve	25173-2
012884	Belte mrs Crissy Swing Away/Cross 6m/bilspenne	62190
016147	Benstøtte amputasjon mrs Crissy Swing Away/Cross 6 grå velour kompl	25516-60
219995	Benstøtte amputasjon mrs Cross 6/Cross 5XL hø grå velour kompl	26210-60-1
154261	Benstøtte Mod1 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 vreg sort	25660-01
025949	Benstøtte Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 liten vinkel kort lb sort	25572-01
025946	Benstøtte Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 liten vinkel kort sort	25571-01
025948	Benstøtte Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 liten vinkel lb	25573-01
025945	Benstøtte Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 liten vinkel sort	25570-01
025943	Benstøtte Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 std vinkel sort	25574-01
025947	Benstøtte Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 std vinkel sort lb	25575-01
021245	Benstøtte Mod3 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 vreg m/leggplate sort	26100
220170	Benstøtte Mod3 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 vreg u/leggplate sort	27149
278551	Benstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL b45 vreg m/leggstøtte grå hø	27858-65-1
278552	Benstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL b45 vreg m/leggstøtte grå ve	27858-65-2
278553	Benstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL b50 vreg m/leggstøtte grå hø	27859-65-1
278554	Benstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL b50 vreg m/leggstøtte grå ve	27859-65-2
278555	Benstøtte mrs Cross 6/Prio Aktiv b40 vreg m/leggstøtte grå hø	27857-65-1
278556	Benstøtte mrs Cross 6/Prio Aktiv b40 vreg m/leggstøtte grå ve	27857-65-2
220184	Beskytter hjulaksel mrs Crissy Swing Away/Cross 6 50stk	27954
154143	Bord Hemi mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b45 lang armlenepute kompl	26563
154165	Bord Hemi mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b48 kort armlenepute kompl	26557
157856	Bord Hemi mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b48 lang armlenepute kompl	26564
154161	Bord Hemi mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b50 kort armlenepute kompl	26558
157857	Bord Hemi mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b50 lang armlenepute kompl	26565
154167	Bord Hemi mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b53 kort armlenepute kompl	26559
157858	Bord Hemi mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b53 lang armlenepute kompl	26566
154168	Bord Hemi mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b55 kort armlenepute kompl	26560
158045	Bord Hemi mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b55 lang armlenepute kompl	26567

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
154138	Bord Hemi mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b58 kort armlenepute kompl	26561
158046	Bord Hemi mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b58 lang armlenepute kompl	26568
154141	Bord Hemi mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b60 kort armlenepute kompl	26562
158047	Bord Hemi mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b60 lang armlenepute kompl	26569
196175	Bord Hemi mrs Crissy Swing Away/Cross 6 halvt halvt hø	27352-1
196176	Bord Hemi mrs Crissy Swing Away/Cross 6 halvt halvt ve	27352-2
154159	Bord Hemi mrs Cross 6/Cross 5XLb45 kort armlenepute kompl	26556
006021	Bord mrs Crissy Swing Away/Cross 6b48 kompl	25187
004499	Bord mrs Crissy Swing Away/Cross 6b50 kompl	24418
006022	Bord mrs Crissy Swing Away/Cross 6b53 kompl	25188
004500	Bord mrs Crissy Swing Away/Cross 6b55 kompl	24419
016550	Bord mrs Crissy Swing Away/Cross 6b58 kompl	25731
012872	Bord mrs Crissy Swing Away/Cross 6b60 kompl	24601
004498	Bord mrs Cross 6 b45 kompl	24417
138838	Bord mrs Cross 6 b63 kompl	26020
220307	Breddesats mrs Prio Aktiv/Cross 6 10mm	27533
220308	Brems enhånds mrs Cross 6/Cross 5XL hø kompl	27531-1
220309	Brems enhånds mrs Cross 6/Cross 5XL ve kompl	27531-2
220326	Brems Mod3 mrs Cross 6 mod3 vinkl håndtak sort ve	27532-2
220321	Brems Mod3 mrs Cross 6/Cross 5XL forl håndtak hø	27530-1
220322	Brems Mod3 mrs Cross 6/Cross 5XL forl håndtak ve	27530-2
220323	Brems Mod3 mrs Cross 6/Cross 5XL mod3 vinkl håndtak rød hø	27528-1
220324	Brems Mod3 mrs Cross 6/Cross 5XL mod3 vinkl håndtak rød ve	27528-2
220325	Brems Mod3 mrs Cross 6/Cross 5XL mod3 vinkl håndtak sort hø	27532-1
220353	Bremsehåndtak mrs Crissy Swing Away/Cross 6 vinklet kompl rød sett	27574
154122	Bremsehåndtak mrs Crissy Swing Away/Cross 6 vinklet kompl sort sett	25537
012870	Bremsespakforlenger mrs Crissy Swing Away/Cross 6 kompl	25515
215072	Camberbrikke mrs Crissy Swing Away/Cross 6 indre Ograder	82570
215073	Camberbrikke mrs Crissy Swing Away/Cross 6 ytre Ograder	82569
154074	Dekk mrs Crissy Swing Away/Cross 6 20" massivt grå	80787
140927	Dekk mrs Crissy Swing Away/Cross 6 22" massivt grå	81384
220365	Dekk mrs Crissy Swing Away/Cross 6 22" x1 høytrykk	81125
140928	Dekk mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" massivt grå	80768
140760	Dekk mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" x1 høytrykk	80558
278561	Deksel feste benstøtte mrs Cross 6	51213
220450	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 22" høytrykk alu u/aksel	27547
220451	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 22" høytrykk cellegummi u/aksel	27548
220452	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 22" høytrykk plast matt u/aksel	27549
220453	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 22" høytrykk u/aksel	27550
220454	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 22" høytrykk u/drivring/aksel	27546

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
220455	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 22" massivt alu u/aksel	27552
220456	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 22" massivt cellegummi u/aksel	27553
220457	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 22" massivt plast u/aksel	27554
220458	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 22" massivt u/aksel	27555
220459	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 22" massivt u/drivring/aksel	27551
279334	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" høytrykk alu Schwalbe	28581
220461	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" høytrykk alu u/aksel	27558
279335	"Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24"" høytrykk cellegummi Schwalbe RightRun u/aksel"	28582
220462	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" høytrykk cellegummi u/aksel	27559
279336	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" høytrykk plast Schwalbe	28583
279337	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" høytrykk Schwalbe RightRun	28584
279338	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" høytrykk titan Schwalbe	28585
220464	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" høytrykk titan u/aksel	27562
220465	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" høytrykk u/aksel	27561
220466	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" høytrykk u/drivring/aksel	27557
181144	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" massivt alu stålnav	82484
220485	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" massivt alu u/aksel	27564
220467	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" massivt cellegummi u/aksel	27565
220468	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" massivt plast u/aksel	27566
220470	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" massivt titan u/aksel	27568
220469	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" massivt u/aksel	27567
220471	Drivhjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" massivt u/drivring/aksel	27563
181141	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 20" brems ledsager massivt alu	81337
279339	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 20" høytrykk alu	28474
279340	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 20" høytrykk cellegummi	28475
279341	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 20" høytrykk plast	28476
279342	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 20" høytrykk rfr	28477
279343	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 20" høytrykk u/drivring/aksel	28420
220444	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 20" massivt alu grå u/aksel	27542
220445	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 20" massivt cellegummi u/aksel	27543
220446	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 20" massivt plast u/aksel	27957
220447	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 20" massivt u/aksel	27544
220448	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 20" massivt u/driving/aksel	27541
220422	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 22" brems ledsager halvmassivt	81338
220425	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 22" brems ledsager høytrykk	81344
220423	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 22" brems ledsager høytrykk alu	81342
220424	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 22" brems ledsager høytrykk plast matt	81343
181133	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 22" brems ledsager massivt	81341
181131	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 22" brems ledsager massivt alu	81339

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
181132	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 22" brems ledsager massivt plast	81340
220429	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 24" brems ledsager halvmassivt	26282
220432	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 24" brems ledsager høytrykk	81351
220430	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 24" brems ledsager høytrykk alu	81349
220431	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 24" brems ledsager høytrykk plast matt	81350
181136	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 24" brems ledsager massivt	81348
181134	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 24" brems ledsager massivt alu	81346
181135	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 24" brems ledsager massivt plast	81347
279344	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 26" høytrykk alu u/aksel	27570
279345	Drivhjul mrs Cross 6/Cross 5XL 26" høytrykk u/aksel	27572
279348	Drivhjul Schwalbe Maraton Plus mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24"	28603
279349	"Drivhjul Schwalbe Maraton Plus mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" høytrykk cellegummi u/aksel"	28604
279350	"Drivhjul Schwalbe Maraton Plus mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" høytrykk plastet u/aksel"	28605
279351	Drivhjul Schwalbe Maraton Plus mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24"	28606
279352	"Drivhjul Schwalbe Maraton Plus mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" høytrykk titan u/aksel"	28607
140734	Drivring D465 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hjul 20" voksen	21034
140766	Drivring D465 mrs Cross 6/Cross 5XL hjul 20" plast sort matt	81229
140736	Drivring D500 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hjul 22"	24395
220776	Drivring D500 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hjul 22" plast	80910
140765	Drivring D500 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hjul 22" plast sort matt	80895
140735	Drivring D540 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hjul 24"	24023
220777	Drivring D540 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hjul 24" plast	80911
140764	Drivring D540 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hjul 24" plast sort matt	82998
181179	Drivring D540 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hjul 24" titan	24540
220774	Drivring D585 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hjul 26"	81510
140737	Drivring mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hjul 20" cellegummi clipsmontert	24442
140739	Drivring mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hjul 22" cellegummi clipsmontert	24551
220764	Drivring mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hjul 22" plast basic	82175
140762	Drivring mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hjul 24" cellegummi clipsmontert	80800
012867	Eikebeskytter mrs Crissy Swing Away/Cross 6 22" grå	25503-28
012866	Eikebeskytter mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24" grå	25504-28
012868	Eikebeskytter mrs Cross 6/Cross 5XL 20" grå	25502-28
021239	Enarmsdrift drivenhet mrs Cross 6/Cross 5XL 20" fast nav	26534
021240	Enarmsdrift drivenhet mrs Cross 6/Cross 5XL 22" fast nav	26533
021241	Enarmsdrift drivenhet mrs Cross 6/Cross 5XL 24" fast nav	26522
220913	Feste bord mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hø kompl	27956-1
220914	Feste bord mrs Crissy Swing Away/Cross 6 ve kompl	27956-2

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
220917	Feste framgaffel mrs Cross 6/Cross 5XL breddet	80899
158043	Feste framgaffel mrs Cross 6/Cross 5XL breddet kompl	25763
253712	Feste hodestøtte Mod4 mrs Cross 6 sb35 kompl	28125
242502	Feste hodestøtte Mod4 mrs Cross 6 sb38 kompl	28126
240216	Feste hodestøtte Mod4 mrs Cross 6 sb40 kompl	28127
236586	Feste hodestøtte Mod4 mrs Cross 6 sb43 kompl	28128
235334	Feste hodestøtte Mod4 mrs Cross 6 sb45 kompl	28129
236964	Feste hodestøtte Mod4 mrs Cross 6/Cross 5XL sb48 kompl	28130
237020	Feste hodestøtte Mod4 mrs Cross 6/Cross 5XL sb50 kompl	28131
220923	Feste klesbeskytter mrs Crissy Swing Away/Cross 6	27396-01
220925	Feste lårstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL	82489
021242	Fotplate hel mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb35-38 kompl	25936
021243	Fotplate hel mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb40-50 kompl	25937
181245	Fotplate hel mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb50-60 kompl	26853
221014	Fotplate kort Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb35 hø	25653-1
221015	Fotplate kort Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb35 ve	25653-2
221021	Fotplate kort Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb38 hø	25654-1
221022	Fotplate kort Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb38 ve	25654-2
221027	Fotplate kort Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb40 hø	25655-1
221028	Fotplate kort Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb40 ve	25655-2
221033	Fotplate kort Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb43 hø	25656-1
221034	Fotplate kort Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb43 ve	25656-2
221039	Fotplate kort Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb45 hø	25657-1
221040	Fotplate kort Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb45 ve	25657-2
221045	Fotplate kort Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb48 hø	25738-1
221046	Fotplate kort Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb48 ve	25738-2
221047	Fotplate kort Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb50-60 hø	25658-1
221048	Fotplate kort Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb50-60 ve	25658-2
221016	Fotplate lang Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb35 hø	25647-1
221017	Fotplate lang Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb35 ve	25647-2
221023	Fotplate lang Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb38 hø	25648-1
221024	Fotplate lang Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb38 ve	25648-2
221029	Fotplate lang Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb40 hø	25649-1
221030	Fotplate lang Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb40 ve	25649-2
221035	Fotplate lang Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb43 hø	25650-1
221036	Fotplate lang Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb43 ve	25650-2
221041	Fotplate lang Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb45 hø	25651-1
221042	Fotplate lang Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb45 ve	25651-2
221049	Fotplate lang Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb48 hø	25737-1
221050	Fotplate lang Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb48 ve	25737-2

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
221054	Fotplate lang Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb50-60 hø	25652-1
221055	Fotplate lang Mod2mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb50-60 ve	25652-2
154248	Fotplateforlenger mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb40-43 kompl sett	50798
154249	Fotplateforlenger mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb45-48 kompl sett	50799
154250	Fotplateforlenger mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb50 kompl sett	50800
154108	Framgaffel kort mrs Crissy Swing Away/Cross 6stålaksel	24677
154107	Framgaffel kort mrs Cross 6/Cross 5XL stålaksel 4mm	24834
154109	Framgaffel lang mrs Cross 6 stålaksel	24679
154111	Framgaffel medium mrs Crissy Swing Away/Cross 6 stålaksel	24678
154112	Framgaffel xliten mrs Cross 6/Cross 5XL stålaksel	26238
220154	Gipsbenstøtte Crissy mrs Crissy Swing Away/Cross 6 3polster kompl hø	27417-1
220155	Gipsbenstøtte Crissy mrs Crissy Swing Away/Cross 6 3polster kompl ve	27417-2
269383	Hodestøtte mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b26 b26 h14 m/turtlestag grå	28534-60
269382	Hodestøtte mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b26 b26 h14 m/turtlestag	28534-65
278683	Hodestøtte mrs Crissy Swing Away/Cross 6 m/m/sidestøtte hygiene grå	28536-65
091720	Hælbånd fotplate mrs Crissy Swing Away/Cross 6	24458
279400	Infusjonsstativ mrs Cross 6/Cross 5XLkompl	28323
221226	Innfestingsrør fotplate mrs Crissy Swing Away/Cross 6 ekstra kort 15mm	82603
221224	Innfestingsrør mrs Crissy Swing Away/Cross 6 fotplate kort	81999
221225	Innfestingsrør mrs Crissy Swing Away/Cross 6 fotplate lang	81998
221227	Innfestingsrør mrs Crissy Swing Away/Cross 6 fotplate std	81997
221222	Innfestingsrør mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hel fotplate hø	25935
221223	Innfestingsrør mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hel fotplate ve	25934
016542	Kjørebøyle mrs Crissy Swing Away/Cross 6 3A rygg rb38 hreg kompl	25578-01
016543	Kjørebøyle mrs Crissy Swing Away/Cross 6 3A rygg rb40 hreg kompl	25579-01
016544	Kjørebøyle mrs Crissy Swing Away/Cross 6 3A rygg rb43 hreg kompl	25580-01
016545	Kjørebøyle mrs Crissy Swing Away/Cross 6 3A rygg rb45 hreg kompl	25581-01
016546	Kjørebøyle mrs Crissy Swing Away/Cross 6 3A rygg rb48 hreg kompl	25582-01
016547	Kjørebøyle mrs Crissy Swing Away/Cross 6 3A rygg rb50 hreg kompl	25730-01
016548	Kjørebøyle mrs Crissy Swing Away/Cross 6 3A rygg sb53 hreg kompl	25583-01
181184	Kjørebøyle mrs Crissy Swing Away/Cross 6 vreg sb38	27162
181185	Kjørebøyle mrs Crissy Swing Away/Cross 6 vreg sb40	27163
181186	Kjørebøyle mrs Crissy Swing Away/Cross 6 vreg sb43	27164
181187	Kjørebøyle mrs Crissy Swing Away/Cross 6 vreg sb45	27165
181188	Kjørebøyle mrs Crissy Swing Away/Cross 6 vreg sb48	27166
181189	Kjørebøyle mrs Crissy Swing Away/Cross 6 vreg sb50	27167
221236	Kjørebøyle mrs Cross 6 3A rygg rb35 hreg kompl	27433-01
181183	Kjørebøyle mrs Cross 6 vreg sb35	27161
215074	Kjørehåndtak mrs Cross 6 hreg	27588-01
181058	Kjørehåndtak mrs Cross 6 hreg std	27338-01

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
221261	Kjørehåndtak mrs Cross 6/Cross 5XL 3A fast	27644
278687	Klesbeskytter mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hø sort M kompl	28547-1
221279	Klesbeskytter mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hø sort m/feste	27397-1
278688	Klesbeskytter mrs Crissy Swing Away/Cross 6 ve sort M kompl	28547-2
221280	Klesbeskytter mrs Crissy Swing Away/Cross 6 ve sort m/feste	27397-2
256516	Komfortkile mrs Crissy Swing Away/Cross 6 h2 b11 l18 par	28139
239982	Komfortkile mrs Crissy Swing Away/Cross 6 h2 b17 l20 par	28140
254882	Komfortkile mrs Crissy Swing Away/Cross 6 h2 b9 l13 par	28030
154192	Komfortkile mrs Crissy Swing Away/Cross 6 setepute sb35-38 universal	80714
157981	Komfortkile mrs Crissy Swing Away/Cross 6 setepute sb40-45 universal	80715
157982	Komfortkile mrs Crissy Swing Away/Cross 6 setepute sb48-60 universal	80779
181155	Krykkeholder mrs Cross 6/Cross 5XL universal kompl	27327
154239	Leggbånd mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb35/38 avtag delb kompl	25356
154240	Leggbånd mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb40/43 avtag delb kompl	25357
154241	Leggbånd mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb45/48 avtag delb kompl	25358
154242	Leggbånd mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb50/53 avtag delb kompl	25359
154311	Leggplate mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb35-38 vreg benstøtte grå	62105-60
154310	Leggplate mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb40-43 vreg benstøtte grå	62104-60
181127	Leggplate mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb45-48 vreg benstøtte grå	62484-60
154314	Leggplate mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb50-60 vreg benstøtte grå	62451-60
221342	Leggplate mrs Cross 6 sb35-38 vreg benstøtte m/konsoll grå	27792
221344	Leggplate mrs Cross 6/Cross 5XL sb45-48 vreg benstøtte m/konsoll grå	27794
221346	Leggplate mrs Cross 6/Cross 5XL sb50-60 vreg benstøtte m/konsoll grå	27795
221343	Leggplate mrs Cross 6/Prio Aktiv sb40-43 vreg benstøtte m/konsoll grå	27793
278647	Leggstøtte mrs Cross 6 Cross 5XL sb45 grå kompl	27734-65
221339	Leggstøtte mrs Cross 6 Cross 5XL vreg kompl	26136
278648	Leggstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL sb50 grå kompl	27735-65
278649	Leggstøtte mrs Cross 6/Prio Aktiv sb40 grå kompl	27733-65
279417	Loddeverktøy mrs Crissy Swing Away/Cross 6	28524
220160	Lårstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL kort hø kompl	27391-1
220161	Lårstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL kort ve kompl	27391-2
220162	Lårstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL lang hø kompl	27392-1
220163	Lårstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL lang ve kompl	27392-2
221356	Lås sammenslått stol mrs Crissy Swing Away/Cross 6	27151
279420	Minnesfunksjon mrs Crissy Swing Away/Cross 6 hodestøtte kompl	28564
279423	Monteringssett brems ledsager C5 mrs Cross 6 m/drivhjul 20" mass/alu	28610
279424	Monteringssett brems ledsager C5 mrs Cross 6 m/drivhjul 22" mass/alu	28609
279425	Monteringssett brems ledsager C5 mrs Cross 6 m/drivhjul 24" mass/alu	28593
221366	Monteringssett drivring mrs Crissy Swing Away/Cross 6	24514
279431	Monteringssett plansete mrs Cross 6 Cross 5XL	27330

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
221545	Navhylse mrs Crissy Swing Away/Cross 6	20024
221834	Polster armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 bred myk kompl	26873
181199	Polster armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 gel kort kompl dartex	26240-63
154270	Polster armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 gel kort kompl grå	26240-60
181200	Polster armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 gel lang kompl dartex	26241-63
154271	Polster armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 gel lang kompl grå	26241-60
154776	Polster armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 polstret kort dartex	62282-63
154312	Polster armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 polstret kort grå	62282-60
154777	Polster armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 polstret lang dartex	62283-63
157951	Polster armlene mrs Crissy Swing Away/Cross 6 polstret lang grå	62283-60
278653	Polster delt fotplate mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb35-40 hør	63188-60-1
267321	Polster delt fotplate mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb43-50 hør	63189-60-1
278654	Polster delt fotplate mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb35-40 ve	63188-60-2
267320	Polster delt fotplate mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb43-50 ve	63189-60-2
221851	Polster gipsbenstøtte mrs Crissy Swing Away/Cross 6 kompl	82520
278657	Polster hel fotplate mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb40-48	63190-60
278658	Polster hel fotplate mrs Crissy Swing Away/Cross 6sb50-60	63191-60
181180	Polster leggbånd mrs Crissy Swing Away/Cross 6 I20	26845
181181	Polster leggbånd mrs Crissy Swing Away/Cross 6 I30	26846
181182	Polster leggbånd mrs Crissy Swing Away/Cross 6 I40	26847
154257	Polster leggplate mrs Cross 6/Cross 5XL	24544-01
181120	Polster leggplate mrs Cross 6/Cross 5XL utsv	27322-01
278825	Polster mrs Crissy Swing Away/Cross 6 str1 m/glidelås	63272
278826	Polster mrs Crissy Swing Away/Cross 6 str2 m/glidelås	62373
221853	Pute lårstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL hør kompl	82488-1
221854	Pute lårstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL ve kompl	82488-2
222011	Pute sete Tidy mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b35	63130-63
222012	Pute sete Tidy mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b38	63131-63
222013	Pute sete Tidy mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b40	63132-63
222014	Pute sete Tidy mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b43	63133-63
222015	Pute sete Tidy mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b45	63134-63
222016	Pute sete Tidy mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b48	63135-63
222017	Pute sete Tidy mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b50	63136-63
004489	Pute sete Universal mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb38grå	62231-60
004490	Pute sete Universal mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb40grå	62232-60
004491	Pute sete Universal mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb43grå	62233-60
004492	Pute sete Universal mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb45grå	62234-60
016365	Pute sete Universal mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb48grå	62374-60
012375	Pute sete Universal mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb50grå	62266-60
004488	Pute sete Universal mrs Cross 6 sb35grå	62230-60

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
278912	Rygg 2B mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b35-40 lav m/trekk hreg	28597
278913	Rygg 2B mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b43-48 høy m/trekk hreg	28595
278914	Rygg 2B mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b43-48 lav m/trekk hreg	28598
278915	Rygg 2B mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b50-55 høy m/trekk hreg	28596
278916	Rygg 2B mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b50-55 lav m/trekk hreg	28599
278919	Rygg 3A Mod5 mrs Cross 6 b35-40 høy	28589
278920	Rygg 3A Mod5 mrs Cross 6 b35-40 std	28586
278921	Rygg 3A Mod5 mrs Cross 6/Cross 5XL b43-50 høy	28590
278922	Rygg 3A Mod5 mrs Cross 6/Cross 5XL b43-50 std	28587
222408	Ryggkile 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 l15 kort	63012-60
222409	Ryggkile 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 l30 lang	63013-60
181054	Ryggpakke Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b35/38	25682
181055	Ryggpakke Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b40/43	25683
157979	Ryggpakke Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b45	25684
157980	Ryggpakke Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b50/48	25685
158001	Seteplate ECS mrs Cross 6 sb35-38 kort kompl	26720
158011	Seteplate ECS mrs Cross 6 sb35-38 lang kompl	26725
158003	Seteplate ECS mrs Cross 6 sb40-43 kort kompl	26721
158013	Seteplate ECS mrs Cross 6 sb40-43 lang kompl	26726
158005	Seteplate ECS mrs Cross 6/Cross 5XL sb45-48 kort kompl	26722
158015	Seteplate ECS mrs Cross 6/Cross 5XL sb45-48 lang kompl	26727
158007	Seteplate ECS mrs Cross 6/Cross 5XL sb50-53 kort kompl	26723
158017	Seteplate ECS mrs Cross 6/Cross 5XL sb50-53 lang kompl	26728
236587	Sidestopp rett mrs Cross 6/Cross 5XL kombineres m/kilepute/sidepute	28136
279048	Sidestopp vinklet mrs Cross 6/Cross 5XL l15kombineres	28137
235202	Sidestopp vinklet mrs Cross 6/Cross 5XL l30kombineres	28173
279049	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL fast +15grader kompl	28143
240315	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL fast 0grader kompl	28142
279050	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL fast -15grader kompl	28144
279051	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL fast -45grader kompl	28145
222525	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL fast h10 l15 dartex kompl	27395
239901	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL utsv 0grader hø kompl	28181-1
239902	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL utsv 0grader ve kompl	28181-2
244149	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL utsv -15grader hø kompl	28180-1
279052	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL utsv -15grader ve kompl	28180-2
279053	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL utsv -45grader hø kompl	28141-1
279054	Sidestøtte 3A mrs Cross 6/Cross 5XL utsv -45grader ve kompl	28141-2
006019	Sidestøtte mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sort hø	25189-1
006020	Sidestøtte mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sort ve	25189-2
222528	Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XLh9 l19 fast 3A kompl	27917

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
222529	Sidestøtte R82 3A mrs Cross 6/Cross 5XLh9 l19 utsv hø kompl	27916-1
222530	Sidestøtte R82 3A mrs Cross 6/Cross 5XLh9 l19 utsv ve kompl	27916-2
222527	Sidestøtte R82 mrs Cross 6/Cross 5XL h6 l17 utsv 3A ve kompl	27915-2
222526	Sidestøtte R82 mrs Cross 6/Cross 5XL h6 l17 utsv 3Ahø kompl	27915-1
181194	Sklisikring bord hemi mrs Cross 6/Cross 5XL	81633
222632	Slange høytrykk mrs Crissy Swing Away/Cross 6 22" luft høytrykk	80136
222633	Slange høytrykk mrs Crissy Swing Away/Cross 6 24x1" høytrykk	80560
222703	Svinghjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 diam12 b3 massivt hardt kompl	27865
222709	Svinghjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 diam15 b3 massivt mykt	27863
222716	Svinghjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 diam16 b3 massivt hardt	27866
222720	Svinghjul mrs Crissy Swing Away/Cross 6 diam20 b3 massivt mykt	27864
222696	Svinghjul mrs Cross 6 diam10 b3 massivt hardt	27870
222719	Svinghjul mrs Cross 6/Cross 5XL diam20 b3 luft	27872
222736	Teleskopaksel enarmsdrift kompl mrs Cross 6 sb35-43 kompl	27317
167422	Teleskopaksel enarmsdrift kompl mrs Cross 6/Cross 5XL sb45-50 kompl	27319
167423	Teleskopaksel enarmsdrift kompl mrs Cross 6/Cross 5XL sb53-58 kompl	27320
167421	Teleskopaksel enarmsdrift kompl mrs Cross 6/Prio Aktiv sb40-43 kompl	27318
181102	Tetra quick release adapter mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sort kompl	24051-01
215098	Tippekring mrs Cross 6/Cross 5XL multi cc 59 kompl	28457
222836	Trekk armlene bord hemi mrs Cross 6/Cross 5XL kort polstret m/borrelås	81631
222837	Trekk armlene bord hemi mrs Cross 6/Cross 5XL lang polstret m/borrelås	81632
222834	Trekk benstøtte amputasjon mrs Crissy Swing Away/Cross 6 grå 25516-	62893-60
222835	Trekk benstøtte amputasjon mrs Crissy Swing Away/Cross 6 velour 25516-	62893-63
279063	Trekk hodestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL hygiene	63177-65
279064	Trekk hodestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL velour	63177-60
222870	Trekk leggplate mrs Crissy Swing Away/Cross 6 vreg benstøtte velour	62762-60
154778	Trekk leggplate mrs Cross 6/Prio Aktiv vreg benstøtte dartex	62762-63
222871	Trekk leggstøtte mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb35-38 62105-60	62888-60
222872	Trekk leggstøtte mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb40-43 62104-60	62889-60
222873	Trekk leggstøtte mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb45-48 62484-60	62890-60
222874	Trekk leggstøtte mrs Crissy Swing Away/Cross 6 sb50-60 62451-60	62906-60
279092	Trekk rygg 2B mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b35-40 høy	63260-60
279093	Trekk rygg 2B mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b35-40 lav	63257-60
279094	Trekk rygg 2B mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b43-48 høy	63261-60
279095	Trekk rygg 2B mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b43-48 lav	63258-60
279096	Trekk rygg 2B mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b50-55 høy	63262-60
279097	Trekk rygg 2B mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b50-55 lav	63259-60
221572	Trekk rygg 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b35 komfort grå	62956-60
221571	Trekk rygg 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b35 komfort høy grå	63033-60
221576	Trekk rygg 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b38 komfort grå	62957-60

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
221575	Trekk rygg 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b38 komfort høy grå	63034-60
221580	Trekk rygg 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b40 komfort grå	62958-60
221579	Trekk rygg 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b40 komfort høy grå	63035-60
221584	Trekk rygg 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b43 komfort grå	62959-60
221583	Trekk rygg 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b43 komfort høy grå	63036-60
221588	Trekk rygg 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b45 komfort grå	62960-60
221587	Trekk rygg 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b45 komfort høy grå	63037-60
221592	Trekk rygg 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b48 komfort grå	62961-60
221591	Trekk rygg 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b48 komfort høy grå	63038-60
221596	Trekk rygg 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b50 komfort grå	62962-60
221595	Trekk rygg 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b50 komfort høy grå	63039-60
181078	Trekk rygg 3A mrs Cross 6 b35 grå	62941-60
221570	Trekk rygg 3A mrs Cross 6 b35 høy grå	63020-60
181079	Trekk rygg 3A mrs Cross 6 b38 grå	62942-60
221574	Trekk rygg 3A mrs Cross 6 b38 høy grå	63021-60
181080	Trekk rygg 3A mrs Cross 6 b40 grå	62943-60
221578	Trekk rygg 3A mrs Cross 6 b40 høy grå	63022-60
181081	Trekk rygg 3A mrs Cross 6 b43 grå	62944-60
221582	Trekk rygg 3A mrs Cross 6 b43 høy grå	63023-60
181082	Trekk rygg 3A mrs Cross 6 b45 grå	62945-60
221586	Trekk rygg 3A mrs Cross 6 b45 høy grå	63024-60
181089	Trekk rygg 3A mrs Cross 6 rb35-40	62953-60
222915	Trekk rygg 3A mrs Cross 6 rd43-50 høy	63015-60
181083	Trekk rygg 3A mrs Cross 6/Cross 5XL b48 grå	62946-60
221590	Trekk rygg 3A mrs Cross 6/Cross 5XL b48 høy grå	63025-60
181084	Trekk rygg 3A mrs Cross 6/Cross 5XL b50 grå	62947-60
221594	Trekk rygg 3A mrs Cross 6/Cross 5XL b50 høy grå	63026-60
181090	Trekk rygg 3A mrs Cross 6/Cross 5XL rb43-50	62954-60
222917	Trekk rygg 3A mrs Cross 6/Cross 5XL rd35-40 høy	63014-60
279102	Trekk rygg B/3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b35 ventilerende	63204-68
279103	Trekk rygg B/3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b38 ventilerende	63205-68
279104	Trekk rygg B/3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b40 ventilerende	63206-68
279105	Trekk rygg B/3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b43 ventilerende	63207-68
279106	Trekk rygg B/3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b45 ventilerende	63208-68
279107	Trekk rygg B/3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b48 ventilerende	63209-68
279108	Trekk rygg B/3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b50 ventilerende	63210-68
029087	Trekk rygg mrs Crissy Swing Away/Cross 6 rb35/38 justbar kompl	62342-60
029088	Trekk rygg mrs Crissy Swing Away/Cross 6 rb40/42 justbar kompl	62343-60
029089	Trekk rygg mrs Crissy Swing Away/Cross 6 rb45 justbar kompl	62344-60
029090	Trekk rygg mrs Crissy Swing Away/Cross 6 rb48/50 justbar kompl	62345-60

Tilbehør - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
175474	Trekk rygg mrs Cross 6 b35 komfort std/høy grå	62895-60
181174	Trekk rygg mrs Cross 6 b38 komfort std/høy grå	62896-60
181175	Trekk rygg mrs Cross 6 b40 komfort std/høy grå	62897-60
181176	Trekk rygg mrs Cross 6 b43 komfort std/høy grå	62898-60
181177	Trekk rygg mrs Cross 6 b45 komfort std/høy grå	62899-60
279117	Trekk rygg mrs Cross 6/Cross 5XLb48 komfort std/høy grå	62900-60
279118	Trekk rygg mrs Cross 6/Cross 5XLb50 komfort std/høy grå	62901-60
221710	Trekk rygg Tidy 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b35	63087-63
221711	Trekk rygg Tidy 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b38	63088-63
221712	Trekk rygg Tidy 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b40	63089-63
221713	Trekk rygg Tidy 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b43	63090-63
221714	Trekk rygg Tidy 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b45	63091-63
221715	Trekk rygg Tidy 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b48	63092-63
221716	Trekk rygg Tidy 3A mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b50	63093-63
222856	Trekk seteforlenger Cross rygg mod3 mrs Crissy Swing Away/Cross 6	62977
222855	Trekk seteforlenger Cross rygg mod3 mrs Cross 6 sb35-43	62976
279260	Tverrstag 3A rygg mod10mrs Cross 6/Cross 5XL b50 kompl	28120
279265	Tverrstag 3A rygg mod4 mrs Cross 6 b35 kompl	28114
279266	Tverrstag 3A rygg mod5mrs Cross 6 b38 kompl	28115
279267	Tverrstag 3A rygg mod6mrs Cross 6 b40 kompl	28116
279268	Tverrstag 3A rygg mod7mrs Cross 6 b43 kompl	28117
279269	Tverrstag 3A rygg mod8mrs Cross 6 b45 kompl	28118
279270	Tverrstag 3A rygg mod9mrs Cross 6/Cross 5XL b48 kompl	28119
154184	Tverrstag mrs Crissy Swing Away/Cross 6 rygg2 sb35/3A rygg sb38 komp	25610
154185	Tverrstag mrs Crissy Swing Away/Cross 6 rygg2 sb38/3A rygg sb40 kompl	25611
099000	Tverrstag mrs Crissy Swing Away/Cross 6 rygg2 sb40/3A rygg sb43 kompl	25612
154175	Tverrstag mrs Crissy Swing Away/Cross 6 rygg2 sb43/3A rygg sb45 kompl	25613
154176	Tverrstag mrs Crissy Swing Away/Cross 6 rygg2 sb45/3A rygg sb48 kompl	25614
154171	Tverrstag mrs Crissy Swing Away/Cross 6 rygg2 sb48/3A rygg sb50 kompl	25739
154153	Verktøysett mrs Crissy Swing Away/Cross 6	25174
223362	Wirepakke brems ledsager mrs Cross 6/Cross 5XL I99	81805

Reservedeler - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
139108	Aksel brems ledsager mrs Cross 6/Prio Aktiv 138mm quick release	81325
279318	Bremseadapter mrs Cross 6/Prio Aktiv 5mm	51019
279321	Camberbrikke mrs Crissy Swing Away/Cross 6 2grader indre	82568
279322	Camberbrikke mrs Crissy Swing Away/Cross 6 2grader ytre	82567
220760	Drivring mrs Crissy Swing Away/Cross 6/Prio Aktiv d465 hjul 20" alu	81109
140743	Drivring mrs Crissy Swing Away/Cross 6/Prio Aktiv d500 hjul 22" alu	25636
140741	Drivring mrs Crissy Swing Away/Cross 6/Prio Aktiv d540 hjul 24" alu	25181
220772	Drivring mrs Crissy Swing Away/Cross 6/Prio Aktiv d585 hjul 26" alu	81508
220912	Feste armlene mrs Cross 6/Prio Aktiv kompl	25535
220918	Feste framgaffel mrs Crissy Swing Away/Cross 6/Prio Aktiv	80606
239980	Feste framgaffel mrs Cross 6 kompl	28147
220922	Feste kjørehåndtak Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 kompl	25676
220920	Feste kjørehåndtak Mod3 mrs Cross 6 hreg kompl hø	27371-1
220921	Feste kjørehåndtak Mod3 mrs Cross 6 hreg kompl ve	27371-2
016126	Fotplate Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b35 std hø	25641-1
016127	Fotplate Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b35 std ve	25641-2
016128	Fotplate Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b38 std hø	25642-1
016129	Fotplate Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b38 std ve	25642-2
016130	Fotplate Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b40 std hø	25643-1
016131	Fotplate Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6 b40 std ve	25643-2
016132	Fotplate Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6/ Prio Aktiv b43 std hø	25644-1
016133	Fotplate Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6/ Prio Aktiv b43 std ve	25644-2
016134	Fotplate Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6/ Prio Aktiv b45 std hø	25645-1
016135	Fotplate Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6/ Prio Aktiv b45 std ve	25645-2
016136	Fotplate Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6/ Prio Aktiv b48 std hø	25736-1
016137	Fotplate Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6/ Prio Aktiv b48 std ve	25736-2
016138	Fotplate Mod2 mrs Crissy Swing Away/Cross 6/ Prio Aktiv b50-60 std hø	25646-1
016139	Fotplate Mod2 mrs Cross 6/Prio Aktiv b50-60 std ve	25646-2
221260	Kjørehåndtak mrs Cross 6 hreg m/håndtak brems ledsager	27625-01
221365	Kjørehåndtak mrs Cross 6 m/wire	27627
181045	Ryggpakke 3A Mod4 mrs Cross 6 b35-40	27382
222419	Ryggpakke 3A Mod4 mrs Cross 6 b35-41 høy	27953
181049	Ryggpakke 3A Mod4 mrs Cross 6 b43-50	27386
222420	Ryggpakke 3A Mod4 mrs Cross 6 b43-50 høy	27990
158029	Trekk sete mrs Crissy Swing Away/Cross 6 35cm kort	62718-60
240197	Trekk sete mrs Crissy Swing Away/Cross 6 38cm kort	62719-60
240198	Trekk sete mrs Crissy Swing Away/Cross 6 40cm kort	62720-60
240199	Trekk sete mrs Crissy Swing Away/Cross 6 43cm kort	62721-60
240200	Trekk sete mrs Crissy Swing Away/Cross 6 45cm kort	62722-60
240201	Trekk sete mrs Crissy Swing Away/Cross 6 48cm kort	62978-60

Reservedeler - Artikkelnummer og HMS nr.

HMS nr.	Beskrivelse	Lev. art. nr
240202	Trekk sete mrs Crissy Swing Away/Cross 6 50cm kort	62979-60
240203	Trekk sete mrs Crissy Swing Away/Cross 6 53cm kort	62980-60
240204	Trekk sete mrs Crissy Swing Away/Cross 6 55cm kort	62981-60
240205	Trekk sete mrs Crissy Swing Away/Cross 6 58cm kort	62982-60
240206	Trekk sete mrs Crissy Swing Away/Cross 6 60cm kort	62983-60
158033	Trekk sete mrs Cross 6 35cm lang	62728-60
279255	Trekk sete mrs Cross 6 38cm lang	62729-60
236921	Trekk sete mrs Cross 6 40cm lang	62730-60
236922	Trekk sete mrs Cross 6 43cm lang	62731-60
236923	Trekk sete mrs Cross 6 45cm lang	62732-60
236924	Trekk sete mrs Cross 6 48cm lang	62984-60
236925	Trekk sete mrs Cross 6 50cm lang	62985-60
279256	Trekk sete mrs Cross 6 53cm lang	62986-60
279257	Trekk sete mrs Cross 6 55cm lang	62987-60
279258	Trekk sete mrs Cross 6 58cm lang	62988-60
279259	Trekk sete mrs Cross 6 60cm lang	62989-60
223205	Trommelbrems mrs Cross 6 hø	27590
223206	Trommelbrems mrs Cross 6 ve	27591







“Vi i Etac ønsker at alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv og følge sine drømmer, uavhengig av fysiske omstendigheter. ”

For nyheter og løpende produktoppdateringer - besøk www.etac.no