

# NUAGE PLS



# TRE FORSKJELLIGE KONFIGURASJONER

## Nuage PLS leveres i tre ulike modeller, alle i kontrakt med NAV

- Nuage PLS – omslutter og støtter hele kroppen, voksne.
- Nuage PLS Active – omslutter og støtter sitteflaten og baksiden av ryggen, voksne.
- Nuage PLS Active XS – omslutter og støtter sitteflaten og baksiden av ryggen, ungdom og små voksne.



## Nuage PLS

En komplett sitteløsning som tilbyr maksimal støtte fra topp til tå. Optimal komfort.

Art.nr. NPLS-NO26 , HMS art. nr. 333769

- Setebredde: 38 – 55 cm
- Setedybde: 40 – 55 cm
- Maks. brukervekt: 120 kg



## Nuage PLS Active

Et sete som enkelt lar seg forlenge med hel leggstøtte (tilbehør) for støtte til hele kroppen. Kombinerer god komfort med maksimal fleksibilitet. Ideell for personer med stram hamstrings.

Art.nr. NPLSA-NO26, HMS art. nr. 333770

- Setebredde: 38 – 55 cm
- Setedybde: 40 – 55 cm
- Maks. brukervekt: 120 kg

## Hvem passer Nuage PLS til?

Nuage PLS er utviklet for passive personer som har begrensede eller ingen muligheter til å endre posisjon selv, eller opplever mye smerter ved sittende. Setesystemet følger personens individuelle kroppsfasong og gir komfortabel støtte i den foretrukne stillingen. De omfattende posisjoneringsmulighetene bidrar til en sitteløsning som gir optimalt støtte ut fra personens muligheter og behov, for eksempel bekkenskjevhet, kyfose eller benlengdeforskjell.

Nuage PLS på rullestolunderstell gir muligheter for en optimal løsning som kombinerer presis tilpassing, komfort og gode kjøreegenskaper.



## Nuage PLS Active XS

Et sete for ungdom og mindre voksne. Enkel å forlenge med hel leggstøtte (tilbehør). Kombinerer god komfort med maksimal fleksibilitet.

Art.nr. NPLSAXS-NO26, HMS art. nr. 333771

- Setebredde: 30 – 40 cm
- Setedybde: 40 – 50 cm
- Maks. brukervekt: 80 kg

## Nuage PLS på ulike understell

Nuage PLS monteres på Ibis rullestolunderstell og gir dermed de beste justeringsmuligheter og kjøreegenskaper i en og samme enhet. Ved spesifikke behov kan setet monteres på andre understell.



Nuage PLS Active montert på den elektriske rullestolen Magic 360

# POSISJONERING OG KOMFORT

## Nuage PLS – svært komfortabelt setesystem med muligheter for god støtte til den passive rullestolbrukeren.

Ved å velge Nuage PLS, velger du maksimal fleksibilitet. Setet gir store muligheter for posisjonering og gode muligheter til justeringer ved endring i behov eller gjenbruk. Nuage PLS setesystemet monteres på rullestolunderstell for en komplett sitteløsning.



Ser du etter maksimal støtte og komfort i sittende stilling? Nuage PLS er utviklet med fokus på passive personer med behov for støtte, stabilitet, kroppsavgrensning og komfort.

## Tilpassings- og gjenbruksvennlig

De ulike mulighetene i Nuage, sammen med stort tilbehørsortiment, gir gode muligheter for å tilpasse setet til et stort spekter av personer. Setet kan enkelt endres for å møte de spesifikke, og i noen tilfeller endrede, behovene til den enkelte. For å gjøre det enda enklere å tilpasse og gjenbruke Nuage PLS, benytter vi samme type trekomponenter og kun ett monteringsbeslag for hele setesystemet, sammen med nøye utvalgte tilbehør.

Fyllet i alle puter til Nuage PLS er laget av spagettiformet pinkumlatex som holdes sammen av multifibre. Det betyr at man uten problemer kan styre og tilpasse mengden fyll i putene via de ulike kamrene. Ønsker man selv å benytte en annen type fyll er dette også en mulighet.



Spagettiformet pinkumlatex

## Omfattende posisjoneringsmuligheter

Setet og ryggen består begge av todelte treskall med justerbare stropper mellom. Både treskallene og stroppene kan monteres i ulike posisjoner slik at Nuage PLS kan tilpasses asymmetrisk i tillegg til i høyde, dybde og bredde. Dette gir mulighet til å tilpasse setet til personer med for eksempel kyfose, ulik benlengde, rotasjoner eller bekkenskjevhet. Med Nuage PLS kan du oppnå en komfortabel og individuelt tilpasset sittestilling til de aller fleste.



Asymmetrisk, justerbare stropper for individuell tilpassing.



Breddejustering av rygg.



Støtteputer i forkant kan fjernes ved behov for å senke låret.



Vinkling av de innebygde sidestøttene.



Justeringspunktene for understellet er intuitive og merket med skala for enklere og mer nøyaktig justering.



Bred hodestøtte med leddet feste gir god støtte og stabilitet.




Hodestøttefestet har memoryfunksjon som sikrer samme posisjon etter demontering.

# TILBEHØR

## Benstøtter



Hel leggstøtte

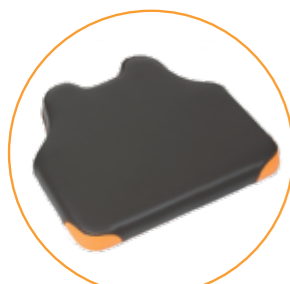

Fotplate  
(Standard på PLS og PLS Active)



Fotplate liten  
(Standard på PLS Active XS)

## Armlener



P-formede armlenepads, 12 cm brede  
(Standard på PLS -serien)



P-formede armlenepads  
16 cm brede



Fleksible armlener

## Hodestøtter



Hodestøtte  
(Standard på PLS og PLS Active)



Hodestøtte liten  
(Standard på PLS Active XS)



Hodestøtte dråpeformet

## Bamboo terry trekk

Bamboo terry trekk er lettere, mykere og føles luftigere. Trekkene er også absorberende.



Til hele Nuage PLS  
setesystem




Trekk til fleksible armlener



Trekk til hodestøtte og  
hodestøtte liten

## Bord

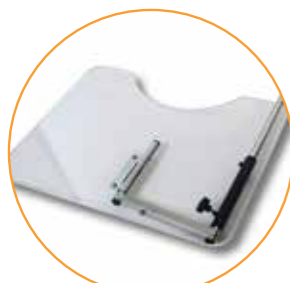


Transparent bord for aktiviteter,  
støtte og avlastning.

## Inkontinenstrekk



Inkontinenstrekk beskytter  
stolputen.

## Abduksjonspute

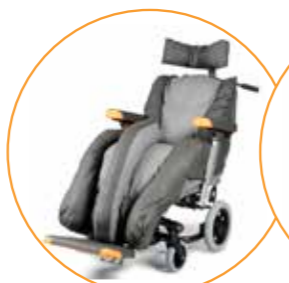

Alle Nuage PLS modellene kan leveres med  
abduksjonsputer for posisjonering av ben.

## Drivaggregat



Drivaggregat gjør det enklere å ta Nuage PLS ut på tur. Her er Nuage PLS vist med Empulse R20.

## SPESIFIKASJONER

	Nuage PLS	Nuage PLS Active	Nuage PLS Active XS
Varenr.:	NPLS-N026	NPLSA-N026	NPLSAX-N026
HMS art.nr.:	333769	333770	333771
Maks. brukervekt:	120 kg	120 kg	80 kg
Setebredde:	38 – 55 cm	38 – 55 cm	30 - 40 cm
Setedybde:	40 – 55 cm	40 – 55 cm	40 - 50cm
Rygg høyde:	55 cm	55 cm	45 cm

### Materialer

Trekk: Dartex

Fyll: Spaghettiformet fyll, fremstilt av multifibre og Pinskumlatex

Skall: Formstøpt, laminert bøkete med borrelås

Nuage PLS modellene er krasjtestet og godjent som passasjer sete i bil i henhold til ISO 7176-19

# VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

## Østfold

Stine Bukholm Tel. 934 70 066  
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818  
tom.johnsen@sunrisemedical.no

## Buskerud /Asker og Bærum

Hanne Helgerud Tel. 975 25 131  
hanne.helgerud@sunrisemedical.no

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818  
tom.johnsen@sunrisemedical.no

## Oslo og Akershus

Petter Bamle Tel. 943 08 987  
(Nord-/Øst)  
petter.bamle@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450  
(Sør-/Øst)  
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501  
(Sentrum)  
markus.pettersen@sunrisemedical.no

## Innlandet

Kjetil Malterud-Lien Tel. 472 56 027  
kjetil.malterud-lien@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817  
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

## Vestfold og Telemark

Peter Eggli Tel. 901 46 181  
peter.eggli@sunrisemedical.no

## Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408  
willy.flaten@sunrisemedical.no

## Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110  
frode.lundal@sunrisemedical.no

## Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891  
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

## Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766  
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

## Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766  
(Sør)  
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313  
(Nord)  
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

## Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330  
bjorn.grande@sunrisemedical.no

## Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313  
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

## Nordland

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170  
julie.pedersen@sunrisemedical.no

## Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332  
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

## Våre salgssjefer

Øst  
Erik Fossum Tel. 908 50 814  
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord  
Willy Flaten Tel. 480 44 408  
willy.flaten@sunrisemedical.no

## Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679  
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS  
Delitoppen 3,1540 Vestby  
T: +47 66 96 38 00  
E: post@sunrisemedical.no  
[www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no).



## MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale  
salgsrepresentanter  
hjelper deg gjerne med  
å vurdere alternative  
løsninger og tilpasse disse.