

- ▶ Dynamisk sittestilling
- ▶ Bevegelsesfrihet
- ▶ 2 størrelser



# ZITZI SHARKY PRO

HJELPEMIDLER FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE

# Zitzi Sharky Pro

## Dynamisk sittestilling

### Bekken,- og benposisjonering

Sharky Pro er en seteenhet med trinnløs setedel, dynamisk støtte og leveres i to størrelser. Et korrekt tilpasset sittesystem med hensiktsmessig setegrep, riktig plassert hoftebelte og god støtte for korsbenet bidrar til bedre stabilitet, økt komfort og lettere aktivitet og postural kontroll. Setet er trinnløst justerbart i setedybde samt abduksjon og adduksjon. Seteenheten er krasjtestet og godkjent for bruk med flere av våre understell.



## Forutsetninger for en god sittestilling

### ► Hoftebelteplassering

Et riktig justert posisjoneringsbelte gir forutsetninger for å posisjonere bekkenet og reduserer risikoen for å skli forover eller bakover. Vi tilbyr posisjoneringsbelter i flere ulike materialer, modeller og størrelser.




**2-punktsbelte**  
Ett festepunkt på hver side



**4-punktsbelte**  
To festepunkt på hver side




**Antirotasjonsbelte**  
To festepunkt på hver side

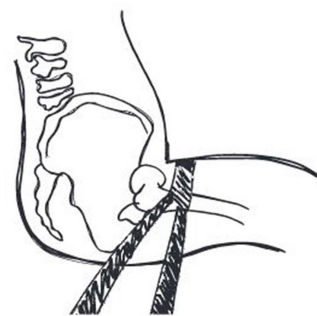

**Riktig beltedrag**

## ► Trepunktsstøtte

Justerbare kroppsstøtter sammen med for eksempel hoftestøtte, skaper en god forutsetning for posisjonering av overkroppen, noe som reduserer risikoen for feilstilling. God postural kontroll fører til bedre hodekontroll og øker mulighetene for aktivitet og årvåkenhet. Vi har dermed mulighet til å både korrigere og opprettholde posisjoneringen av overkroppen.

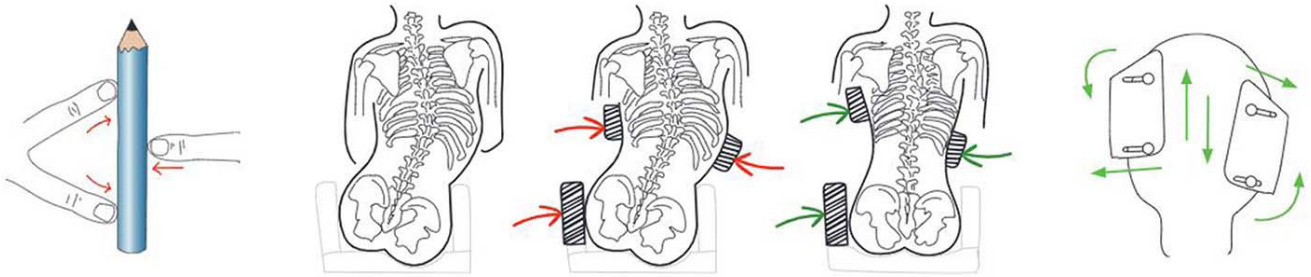

## ► Posisjoneringssele

Sammen med hoftebeltet gir sternumstøtten eller H-beltet god støtte for posisjonering av overkroppen, noe som gir forutsetninger for bedre hodekontroll.



### Sternumstøtte


- Konsentrert støtte over brystbenet
- Motvirker fall fremover



### H-sele

- Holder skulderpartiet på plass og motvirker rotasjon
- Passer godt de som bruker sonde

## ► Flexfunksjon/hoftevinkeljustering

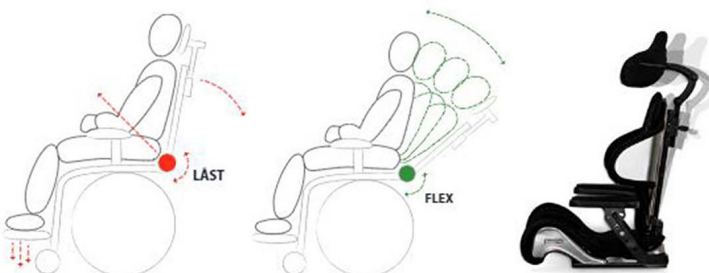

Dynamiske støtter gir bevegelsesfrihet, variasjon og kan gi en beroligende effekt ved ekstensjonsspastisitet. Sittesystemet er utstyrt med et flexledd som gjør ryggstøtten fleksibel. Ryggen er justerbar i hoftevinkelen, noe som bryter spastisiteten og flexleddet fanger opp kraften og dermed beholder posisjonen i sittende stilling.

## Eksempler på ulike nakkestøtter



Aktivt pannebånd



HeadActive



Heads Up



Pro Serie

Teknisk data	Str. 1	Str. 2
<b>Brukerlengde</b>	150-180 cm	170-195 cm
<b>Ryggbredde</b>	35 cm	36 cm
<b>Rygghøyde maks.</b>	73 cm	79 cm
<b>Setebredde</b>	36-42 cm	43-49 cm
<b>Setedybde</b>	37-47 cm	45-55 cm
<b>Egenvekt</b>	14 kg	15 kg
<b>Maks. brukervekt</b>	130 kg	
<b>Art. nr.</b>	151011K	151016K
<b>HMS. nr.</b>	334042	334043



Alle trekk kan vaskes på 60°C

**OBS!** Velg forsterket rygg når brukeren har høy tonus



## Fakta

Stort utvalg av tilbehør

Mange justeringsmuligheter -vokser med brukeren

Brukervennlig

Passer til både utendørs og innendørs understell

Krasjtestet og godkjent

Det kreves ikke verktøy for justering av for eksempel fotstøtte, setestøtte og armlene

### Hvilket understell bør jeg velge?

**Sharky pro str. 1** - Flipper G2 str. 4 / Flipper Flex G2 / Guppy G2 str. 3 / Seabass str. 2

**Sharky pro str. 2** - Flipper G2 str. 4 / Flipper Flex G2 / Guppy G2 str. 4 / Seabass str. 3

For mer informasjon ved valg av understell, ta gjerne kontakt med en av våre fagkonsulenter