



# Alber® viamobil®



Den sterke hjelpemotoren  
for rullestoler



Yes, you can.®



# Viamobil:

## Kraftig motor, enkel å betjene!

3. plass  
Delkontrakt 21

Alber viamobil V25 er utstyrt med en kraftig motor som klarer en brukervekt opptil 160 kg, samtidig som den er lett å betjene og manøvrere.

Stigninger og nedoverbakker opp til 18 % kan trygt forseres uten fysiske anstrengelser for ledsager. **Alber viamobil** plasseres under rullestolen og hindrer derfor ikke ledsager fra å kunne gå behagelig.

**Alber viamobil** hjelper til med kjøring fremover, rygging og oppbremsing ved kjøring i nedoverbakke. **Alber viamobil** er modulbasert og kan derfor enkelt demonteres og transporteres i bilen.

### Dynamisk kjøring

Med den sterke motoren er **Alber viamobil** en pålitelig partner på reisen. Det integrerte fjærsystemet gir godt veigrep for drivhjulet, mens de punkteringsfrie dekkene gjør turen bekymringsfri. Med et tastetrykk senker du drivhjulet og setter motoren automatisk i gang, og motsatt hvis du vil kjøre rullestolen manuelt. Drivhjulet er plassert i linje med rullestolen, noe som gjør det veldig enkelt å manøvrere **viamobil** uten anstrengelser.

### Lett å bruke, maksimal sikkerhet

Det innovative EasyConnex Magnetic Plug-systemet kobler automatisk styreenheten og laderen sammen med batteriet. Hold helt enkelt den magnetiske kontakten nær uttaket og - klikk - så er den koblet til og låst. Det store og klare displayet gir ledsageren nøyaktig informasjon om batterikapasiteten. Den unike og patenterte sikkerhetsbryteren i styreenheten gjør at **viamobil** kan stoppes direkte i kritiske situasjoner, noe som gir maksimal trygghet for både bruker og ledsager.

### Transportabel

**Alber viamobil** kan lett demonteres i små komponenter for enklere transport. Takket være lithium-ion-teknologi, har det kraftfulle batteriet en vekt på kun 2,3 kg, og er dermed veldig enkel å håndtere. Batteriet tilfredsstiller også internasjonale IATA-regler som vil si at det trygt kan tas med på fly. Batteriet kobles automatisk til drivenheten ved hjelp av magnetisk kraft. **Alber viamobil** kan monteres på nesten alle manuelle rullestoler. Takket være den kompakte størrelsen, påvirkes ikke komfortrullestolens sitteinnstillinger slik som rygg og tilt. Kun små låsesplinter skal til for at **Alber viamobil** skal kunne monteres og demonteres på rullestolen.




### Egenskaper og inkluderte komponenter



#### Alber viamobil klar for transport

De kompakte og lette komponentene er enkle å transportere.

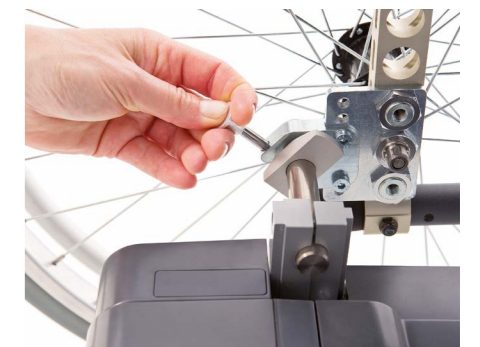









#### Montering

**Alber viamobil** monteres og demonteres raskt og enkelt uten bruk av verktøy.

### Tilbehør

## Tekniske data

				
Fart ▼	Rekkevidde ▼	Batteri- kapasitet ▼	Motorkraft ▼	
viamobil	maks 5.5 km/t	20 km	36V / 6,6 Ah	150 W
				
Vekt batteri ▼	Maks trygg helling ▼	Total vekt fra ▼	Maks. brukervekt ▼	
viamobil	2,3 kg	18% (11% med 160 kg bruker)	13,5 kg (kjøreenhet: 10,3 kg)	160 kg

## HOVEDPRODUKT (standardkonfigurasjon)

Art-nr	HMS-nr	Beskrivelse
1521003	176396	viamobil V25 kjøreenhet inkl. batteri, batterilader og standard håndkontroll



### BESTILLINGSTIPS

- Oppgi hvilken rullestol viamobil V25 skal monteres på, samt stolens setebredde og setedybde, for riktig monteringskit.
- Ved ny-bestilling: Husk å spesifisere ønsket tilbehør.
- Anbefalt tilbehør: Ekstra kjørehåndtak for bedre ergonomi for ledsager og Jack Up-tippesikringer.

### SE VÅRE PRODUKTVIDEOER



Scann QR-koden med telefonen din, og få tilgang til våre produktpresentasjoner og "how to"-videoer.



●●● MADE IN GERMANY

Tlf: 22 57 95 00  
norway@invacare.com  
www.invacare.no

Postadresse:  
Invacare AS  
Postboks 6230 Etterstad  
0603 Oslo

Besøksadresse:  
Invacare AS  
Brynsveien 16  
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:  
Invacare AS  
Østensjøveien 19  
0661 Oslo

