

SUNRISE  
MEDICAL

Empulse.



E | F35







VÅR MINSTE OG LETTESTE  
DRIVAGGREGAT NOENSINNE



## LEI AV KLUMPETE DRIVAGGREGAT?

Selv små dytt fremover kan over tid gi belastning på skuldrene. Mange frontmonterte drivaggregat kan avlaste, men de er ofte for tunge og upraktiske i hverdagen – særlig ved korte turer i nærmiljøet eller når man er på reise.

Empulse F35 kombinerer funksjonalitet og brukervennlighet i et ultrakompakt format. Det lette drivaggregatet er enkelt å ta med seg og gir effektiv og smidig mobilitet, uten å gå på kompromiss med praktiske behov.

-  Vår minste og letteste drivaggregat noensinne
-  Får plass i små biler og trange rom
-  Minste svingradius og opptil 15 km rekkevidde – alt i en kompakt ramme
-  To dokkingløsninger – for enkel innkjøring, utkjøring og tilgjengelighet overalt
-  Passer til de fleste faste eller sammenleggbare rullestoler
-  Reisevennlig batteri – ideelt for fly, bil og tog (IATA-godkjent\*)

\*kontakt flyselskapet for informasjon



Skann QR-koden for å se F35 i bevegelse



Perfekt for hyppige stopp: Koble F35 fra dokkingramma på få sekunder.

## TO MÅTER Å DOKKE PÅ – VELG DEN LØSNINGEN DU TRENGER

1 "Den raskeste": enkel patentert dokking i én bevegelse for raske stopp i byen. Hovedrøret kan enkelt fjernes fra mottakeren, mens dokkingramma blir sittende på rullestolen. Perfekt for pauser når F35-støtte ikke er nødvendig, for eksempel på kafé, på universitetet eller kontoret. Og det beste? Den festes på nytt på få sekunder når du trenger ekstra hjelp.

Sammenleggbare og låsbare håndtak – enkelt å håndtere! Passer i små biler og gjør overganger inn og ut av bilen raske og problemfrie.




Skann QR-koden for å se hvordan F35 kobles til en rullesto



2

2 "For lagring": Når det er tid for å gå fra rullestol til bil, sofa eller seng, kan hele enheten enkelt fjernes fra stolen. Fjern hovedrøret og understellet ved hjelp av de brukervennlige klemmene – den perfekte løsningen for å oppbevare F35.

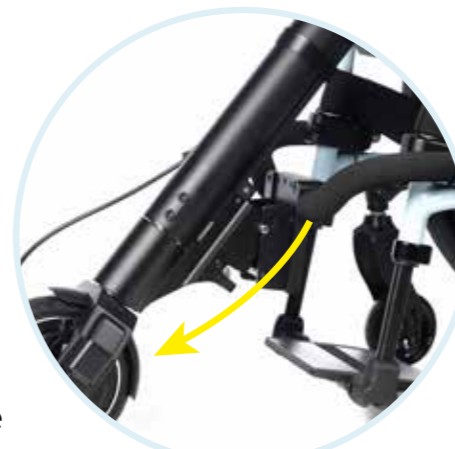

Kan deles i to lettere deler for enkel transport (dokkingramma og F35 kan skilles).

## KOMPAKT OG LETT – GJØR OVERGANGER TIL OG FRA BIL ENKLERE

Fjærlett: Enten du er alene eller får hjelp, veier F35 kun 7,5 kg når understellet er fjernet. Dette gjør biloverganger enkle og fremmer selvstendighet i hverdagen.

Smart og kompakt design: F35 har et strømlinjeformet og kompakt design med alt-i-ett-rør, som sikrer enkel håndtering og transport uten unødvendig volum.


Få kraft med flygodkjente 4Ah-batterier – kompakte, men kraftige, og akkurat det du trenger for kjøring og reiser i byen (sjekk på forhånd med flyselskapet for spesifikke batterikrav).

Det intelligente batteristyringssystemet og de innovative 21700-battericellene sørger for at du får mest mulig ut av hver lading. Smart og effektivt – akkurat som deg.

Ekstremt kompakt svingradius: I folkemengder eller heiser – sving smidig med en svært kompakt svingradius.



Med hele 15 km rekkevidde får du friheten til å utforske langt og vidt.

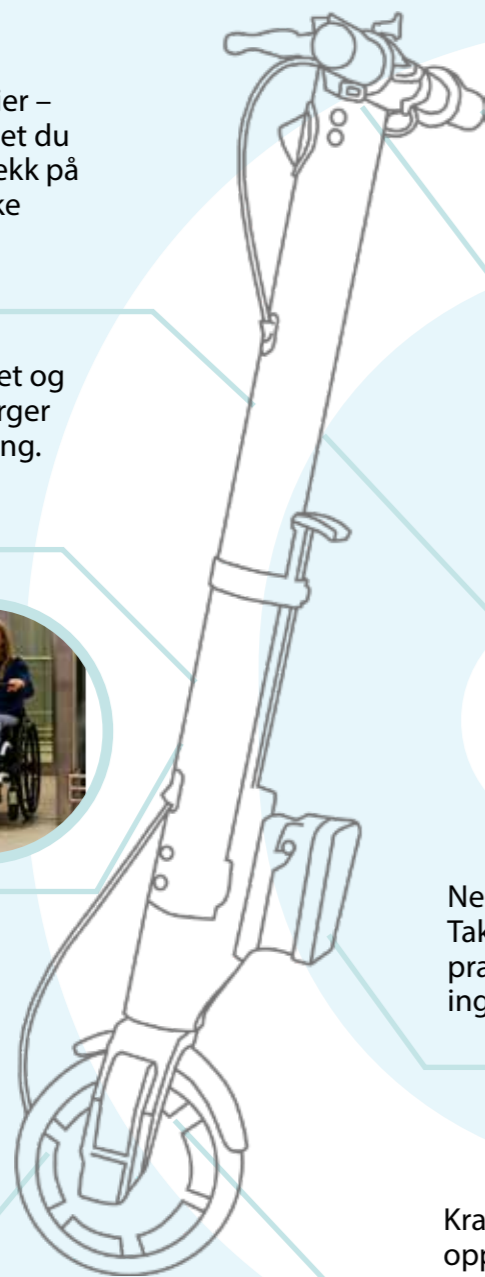

**Kraftig bremsesystem:** Dra nytte av et dobbelt bremsesystem – en proporsjonal elektronisk brems og en pålitelig trommelbrems – samt en parkeringsbrems som gir presis kontroll og sikkerhet under reisen.



**Cruisekontroll:** Holder farten jevn både oppover og nedover.



**Mestre bakker:** Parkeringsplasser, ramper, kollektivtransport, fortau – takle hverdagslige hindringer med trygghet! F35 kan klatre en 6-graders stigning, selv med maksimal brukervekt på 110 kg.

**Neste nivå av stabilitet:** Si farvel til ustødige turer! Takket være et patentert låsemekanisme sitter F35 praktisk talt fast i understellet. Ingen risting, ingen klapping – bare en trygg og stabil kjøreopplevelse.



**Kraftig motor:** Opplev en dynamisk kjøreopplevelse med en 250-watts motor, som sikrer jevn og responsiv fremdrift



**3 hastigheter tilgjengelig:** Velg farten som passer deg – enten rolig 6 km/t, moderat 10 km/t eller rask 15 km/t.



**Ingen hjulspinn:** 3 akselerasjonsmoduser (Sakte, Standard, Rask) tilpasser kraften til underlaget.



**USB-ladeport:** Lar deg lade telefonen, slik at du ikke trenger å bekymre deg for tomt batteri når du bruker navigasjon eller hører på musikk.



Skann QR-koden for å se servicevideoene.

**LED-lys:** LED-lyset er integrert i F35s design og gir deg en praktisk måte å lyse opp veien på, samtidig som det øker synligheten din.



## TEKNISKE DATA

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Maks brukervekt             | 110 kg  |
| Maks mål                    | 915 mm x 584 mm x 610 mm<br>(høyde x bredde x dybde)  |
| Batterirekkevidde*          | Opp til 15 km   |
| Maksimal stigning           | Opp til 11% (6°)  |
| Vekt                        |   |
| inkl. batteri og understell | fra 9 kg  |
| Transportvekt               | fra 7.5 kg  |
| Frontbredde                 | 260 – 480 mm  |
| Farge                       | Sort  |
| Justerbar maks hastighet    | 6 km/t; valgfritt 10/15 km/t<br>(farten kan justeres i 3 nivåer)  |
| Batteri                     | Lithium-Ion 36V<br>4Ah  |
| Batteriladetid              | ca. 2 timer   |
| Hjulstørrelse               | 6,5"  |
| Motor                       | 250 watt  |
| Bremseystem                 | Dobbelt bremseystem med mekanisk trommelbremse og egen proporsjonal elektronisk motorbremse, i tillegg til parkeringsbremse |
| Garanti                     | i henhold til lokale forskrifter  |
| Samsvar                     | EN12184   |

(1) Rammebredden måles fra senter av rør til senter av rør ved monteringspunktet.



F35 Hjemmeside



F35 Bestillingsskjema

SUNRISE MEDICAL BRYR SEG OM DIN SIKKERHET. Les brukerhåndboken for sikre bruksanvisninger og vedlikeholdsrutiner.

\*Rekkevidden avhenger av underlag, brukervekt, kjøreatferd, temperatur og terreng, i henhold til ISO 7176-4.

Sunrise Medical AS

Delitoppen 3  
1540 Vestby  
Tel.: +47 66 96 38 00  
E-post: [post@sunrisemedical.no](mailto:post@sunrisemedical.no)



Hvis du har synshemming, kan dette dokumentet leses i PDF-format på [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)



## PYNT DEN OPP!



Mobilholder: Mobilholderen lar deg holde deg tilkoblet og ha kontroll mens du kjører.



Bil-ladeadapter: Bil-ladeadapteren sørger for at du holder batteriet oppladet uansett hvor reisen går.



Lås den – trygghet uansett hvor du parkerer F35.

