



Molift Mover 205

Allround mobil personløfter med ekstra lavt understell, for enkelt å komme innunder lavere senger og andre møbler.

Fleksibel og robust

Molift Mover 205 er en fleksibel allround mobil passiv løfter for alle løfte- og forflytningssituasjoner.

Løfteren har lav totalvekt og er enkel å trille og manøvrere.

Likevel er den robust og tåler en brukervekt på opptil 205 kg.

Det lave understellet gjør det enkelt å trille bena innunder f.eks. seng eller stol.

Stort løfteintervall

Molift Mover 205 har god løfthøyde, og løfter fra gulv. Løfteren leveres som standard med 2-punkts løftebøyle. Quick release funksjonen gjør det meget enkelt å bytte løftebøyle.

Løfteren kan brukes med både 2- og 4 punkts løftebøyer.



molift[®]



Håndkontroll

Robust og vaskbar (IPX6) med indikatorer for batterinivå, overbelastning og service.



Unikt kjørehåndtak

Det unike kjørehåndtaket har mange grepsmuligheter, gir et naturlige grep og god ergonomi.



Quick-release funksjon

Quick-release funksjonen gjør det meget enkelt å bytte løftebøyle.

Egenskaper

Ergonomisk utforming

Molift Mover 205 er utstyrt med Molifts unike kjørehåndtak som gir fleksible grepsmuligheter og bedre ergonomi for pleiepersonell.

Forventet levetid

Løfteren har, ved normal og tilsiktet bruk, en forventet levetid på 30 000 løftesykluser eller 15 år, avhengig av hva som inntreffer først.

Batteri

Lithium-Ion batteriet har et forseglet design og er vaskbart (IPX6). Batteriet veier kun 0,9 kg og kan byttes ut med ethåndsgrep.

Batteriet kan lades direkte på løfteren. Ekstern lader kan fås som tilbehør. Ladetiden er kun 3,5 timer. Når batteriet er fulladet, gir det opptil 130 løft ved 75 kg per løft, og det er kompatibelt med alle Molifts passive mobile personløftere.

Batteriet har en forventet levetid, ved normal og tilsiktet bruk, på 1 700 ladesykluser.



Speed boost

Funksjonen for hastighetsøkning gjør det mulig å øke løftehastigheten når aktuatoren ikke er belastet. Dette sparer tid i hverdagen.

Håndkontroll


Håndkontrollen er robust og velprøvd. Den har indikatorer for batterinivå, overbelastning og service, som sikrer optimal ytelse og sikkerhet.

Håndkontrollen er designet for lang levetid. Skulle man være uheldig å få en skade på kabelen, kan man enkelt bytte denne, uten at selve håndkontrollen må byttes. Håndkontrollen er vaskbar (IPX6).

Molift Service Tool

Molift Mover 205 er, som alle Molift-løftere, utstyrt med et unikt servicevarslingsystem som gir beskjed når det er behov for service. Den integrerte serviceprogramvaren viser data om bruk av løfteren, løftemønstre og informasjon for feilsøking.

I tillegg er løfteren utstyrt med Bluetooth-tilkobling som muliggjør trådløs tilkobling til Molift Service Tool.

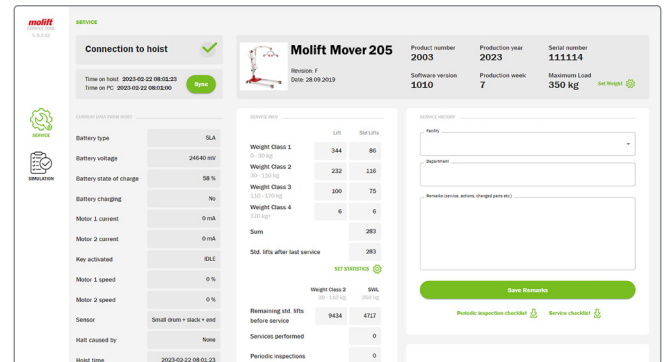

Produkt

Molift Mover 205, lavt understell, 2-pkt løftebøyle M

HMS nr.

329915

Art. nr.

M1402-01

Materiale

Aluminium, stål, plast

Vekt

Maks brukervekt (SWL) 205 kg
Vekt produkt uten batteri 36 kg

Mål

Høyde 2020 mm
Lengde 1285 mm
Høyde ben, lavt understell 55 mm
Hjulstørrelse, hjul bak 100 mm
Løfteintervall 1430 mm
Løft min-maks m/2-pkt løftebøyle, lavt understell 460 - 1890 mm
Utvendig bredde med samlede ben 690 mm
Utvendig bredde med åpne ben 1205 mm
Innvendig bredde med samlede ben 550 mm
Innvendig bredde med åpne ben 1065 mm

Teknisk informasjon

Batteri Li-Ion 25.2V, 2.85Ah
Ladetid batteri 3.5 time
Løftehastighet 40 mm/sek
Antall løft med fulladet batteri 130 løft/75 kg

Rengjøring

Rengjør / desinfiser produktet ved bruk av løsemiddelfritt rengjøringsmiddel med pH mellom 5 og 9, eller med 70% desinfeksjonsmiddel.



max 205 kg
max 452 lbs



For mer informasjon om våre produkter og løsninger, se etac.no

Etac

815 69 469
hovedkontor.norge@etac.com
www.etac.no

etac
Creating Possibilities