


Trykkavlastende produkter

The image features a dramatic sunset scene with two hands reaching towards each other in the center. The hands are positioned as if they are about to clasp or are in a gesture of offering. The sky is filled with warm, golden light and scattered clouds. In the bottom right foreground, there is a dark, textured rock. The overall mood is one of hope, support, or reaching out.

Lanapelle

Innhold

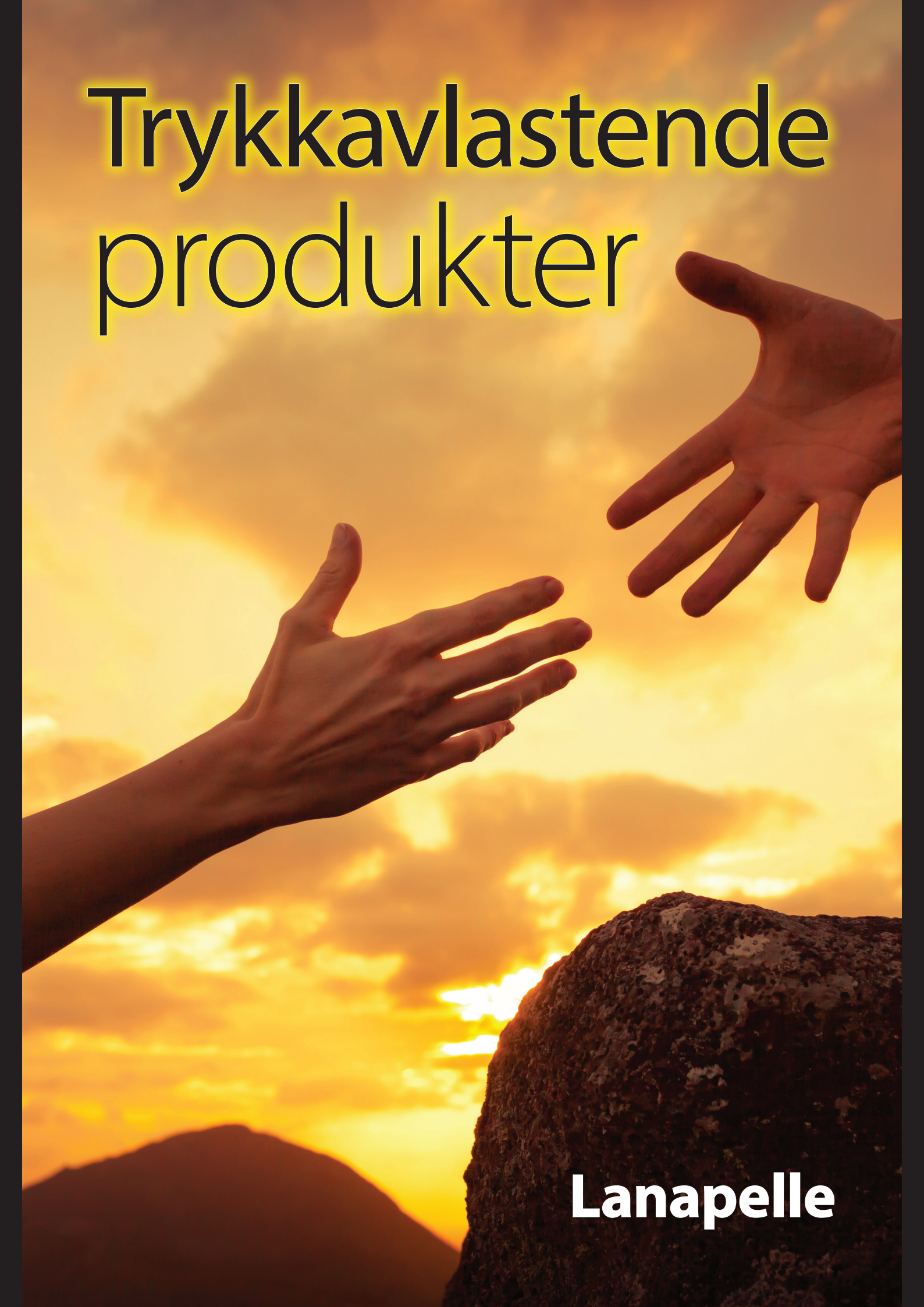

Om Lanapelle	3
Trykkavlastning	4
Saueskinn	5
Sete-/Ryggavlaster	6
Armbeskyttere	7
Fotavlastere	8
Leggavlaster	9
Hælbeskyttere	10
Albuebeskyttere	11
Håndflatebeskytter	12
Skinn (smalt)	13
Overmadrass (voksen)	14
Overmadrass (barn)	15
Omslagstøfler (kort)	16
Omslagstøfler (lang)	17
Trykkmåling	18
Produktinfo	19

Om Lanapelle



Lanapelle i Australia

Trykksår er et vanlig problem i mange helseforetak verden over. Det påvirker alle aldersgrupper, og er dyrekjøpt både når det gjelder menneskelig lidelse og ressursbruk. Lanapelle i Australia er fabrikant av enestående saueskinnsprodukter til medisinsk bruk ved trykksår, og er en del av et av verdensledende ullforedlingsselskap, med over 130 års markeds- og produktkunnskap.

Litt om Lanapelleproduktene

Lanapelleproduktene er laget av skinnet til merinosauen, som inneholder 5–6.000 fiber/cm². Dette gjør at Lanapelleproduktene skiller seg ut fra alle andre saueskinn.

Dokumentasjon

Produktene våre er testet og har all nødvendig dokumentasjon som NAV/norske myndigheter krever. Produktene er CE-merket (merket AS4480-1, som er likeverdig med norske krav).

Urinresistent/UR

Alle våre produkter kan benyttes av brukere med inkontinensproblematikk, da de tåler kroppsvæske som blod, urin o.l.

Airtech

Lanapelleprodukter til hender og føtter produseres med perforert skinn (Airtechprosess) for å gi optimal varme- og luftsirkulering.

Trykkavlastende

Bruker kan synke 30 mm ned i skinnet. Dermed økes kontaktflaten, og trykket reduseres.

Farger

Fargene på produktene kan variere mellom blå, grønn og hvit. Dette kan dessverre ikke velges ved bestilling.

Reduksjon av friksjon og fuktighet

Skinnet/ullfibrene beveger seg med bruker, og friksjon reduseres. Skinnet tar opp fuktighet uten at terapeutiske egenskaper svekkes, noe som er en stor fordel for de som sitter og/eller ligger mye.

Garanti ved vask

Vask på 80°C dreper de fleste bakterier, og er et krav til vasketemperatur på sykehus. I motsetning til vanlige saueskinn, tåler Lanapelleproduktene vask på 80°C uten å miste sine terapeutiske egenskaper. Lanapelle Australia tilbyr en garanti på produktene med inntil 50 vask, forutsatt at vaskeanvisningen er fulgt.

Viktig å huske på ved vask

Lanapelleproduktene skal vaskes med vaskemidler for ull og silke. Det anbefales Lanapelle Ullvask eller Milo. Tøymykner skal ikke benyttes da vanlig tøymykner "spiser" ull. Det anbefales lufttørring framfor bruk av tørketrommel. **Vær varsom dersom du likevel velger å bruke tørketrommel!**

Allsidige produkter

Lanapelle har en rekke trykksårforebyggende produkter til barn og voksne. Ullens naturlige egenskaper, sammen med den unike framstillingsprosessen, gjør produktene til noen av verdens mest allsidige og holdbare saueskinnsprodukter som er tilgjengelig på markedet i dag.

TENDENZ
VELVÆRE



913 10 878



postmottak@tendenz.no

Trykkavlastning



Lanapelle medisinsk saueskinn til forebygging og behandling av trykksår:

- ✓ Lanapelle medisinske saueskinnsprodukter er naturprodukter fra merinosauen
- ✓ Ullen er finfibret og meget tett (4.000–6.000 hår/cm²)
- ✓ Høyden på ullfibrene er hele 30 mm
- ✓ Skinnet kan benyttes av brukere med inkontinensproblematikk
- ✓ Tåler maskinvask inntil 80°C (OBS! Følg vaskeanvisningen)
- ✓ Lanapelleproduktene er testet og har all nødvendig dokumentasjon som er krevet av norske myndigheter og NAV

Fin å bruke ved:

- ✓ Pågående trykksår
- ✓ Fare for utvikling av trykksår
- ✓ Diabetes (den diabetiske fot)
- ✓ Hemiplegisk arm
- ✓ Benskjørhet (osteoporose)
- ✓ Sirkulasjonssvikt
- ✓ Ulike kroniske lidelser
- ✓ Kreft (smertelindring)

Fordeler ved bruk av Lanapelle:

- ✓ Trykkavlastende
- ✓ God luftsirkulasjon
- ✓ Temperaturregulerende
- ✓ Reduserer friksjon
- ✓ Tåler kroppsvæske

TENDENZ
VELVÆRE




913 10 878



postmottak@tendenz.no

Saueskinn

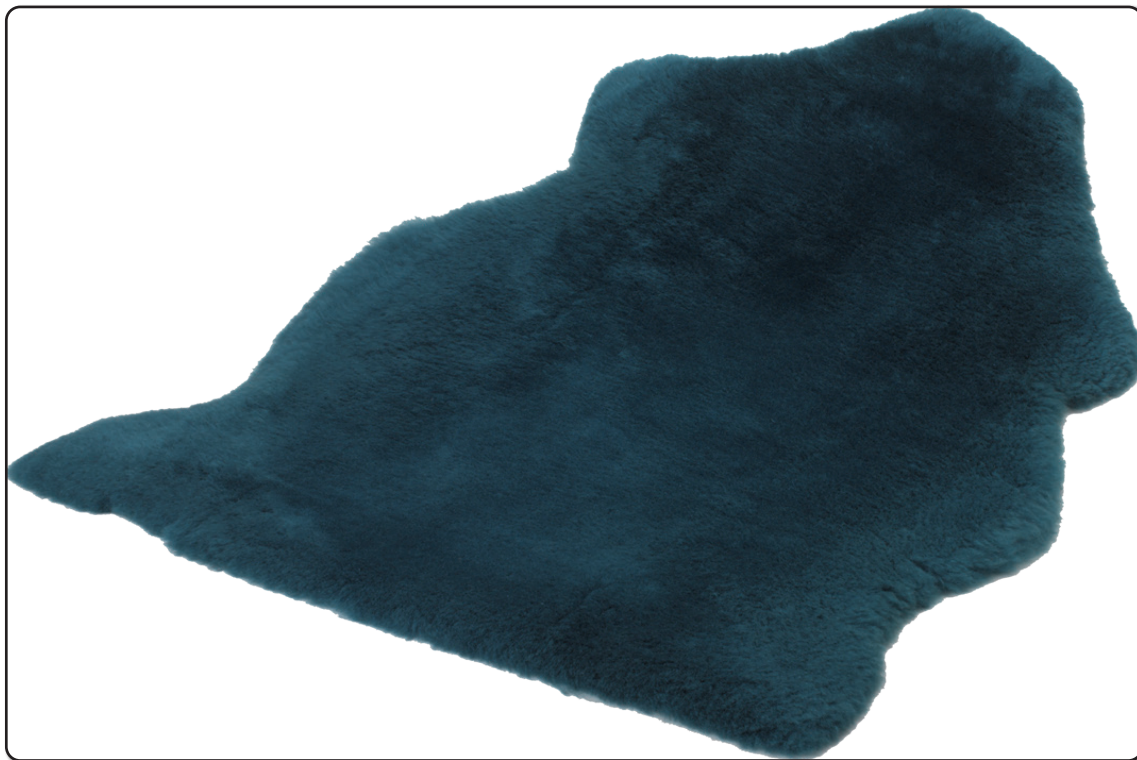

Skinnet brukes til forebygging og behandling av trykksår, og kan enkelt plasseres i godstolen, senga eller rullestolen.

Passer utmerket til bruk i forbindelse med tilpassing, da skinnet ikke har sømmer og dermed er enkelt å klippe til.


BESTILLINGSINFO:

Enhet: **Stk**

Størrelse	Art.nr.	Hjelpemiddelnummer
63 x 92 cm	7981	144919



Sete-/Ryggavlaster

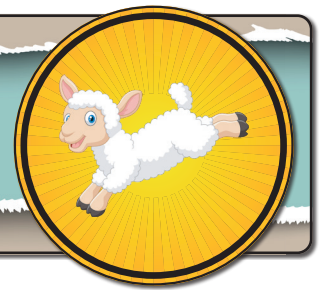

Sete-/ryggavlaster brukes til forebygging og behandling av trykksår. Kan brukes oppå standard skumpute i rullestol, i vanlig stol og i bil.

De påsydde onesize velcrostroppene festes enkelt rundt pute/rygg. Skinnet gir reduksjon av friksjon ved forflytning.

BESTILLINGSINFO:

Enhet: **Stk**

Størrelse	Art.nr.	Hjelpemiddelnummer
46 x 55 cm	8007	154779



Armbeskyttere



Armbeskytterne brukes til forebygging og behandling av trykksår, og for å gi bedre komfort til armene.

Beskytterne brukes på armlenet på rullestolen, kontorstolen og eventuelle andre armlener der den vil passe.

BESTILLINGSINFO:

Enhet: **Par**

Størrelse	Art.nr.	Hjelpemiddelnummer
One Size	2145	217575



Fotavlastere



Fotavlasterene brukes både til forebygging og behandling av trykksår hos mennesker som sitter i rullestol.

Produktene er designet for å begrense og fordele trykket på føttene, og har påsydde strikk/lommer slik at de enkelt skal holdes på plass.

BESTILLINGSINFO:

Enhet: **Par**

Størrelse	Art.nr.	Hjelpemiddelnummer
One Size	8008	154772



Leggavlastere



Leggavlasterene brukes både til forebygging og behandling av trykksår hos mennesker som sitter i rullestol.

Produktene er designet for å begrense og fordele trykket på leggene, og har påsydde strikk/lommer slik at de enkelt skal holdes på plass.


BESTILLINGSINFO:

Enhet: **Par**

Størrelse	Art.nr.	Hjelpemiddelnummer
One Size	8005	154773



Hælbeskyttere

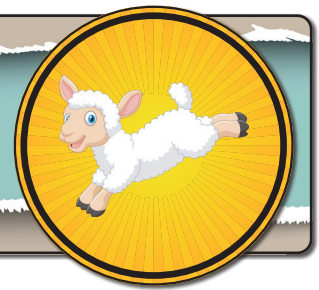

Hælbeskytterne brukes både til forebygging og behandling av trykksår.

Ved bruk av disse får hælene bevege seg fritt sammen med ullfibrene og dermed oppstår det minimalt med friksjon. Med den kraftige borrelåsen tilpasses størrelsen over vristen etter brukerens ønske og behov.

BESTILLINGSINFO:

Enhet: **Par**

Størrelse	Art.nr.	Hjelpemiddelnummer
35–40 (Small)	8002	055040 (husk å oppgi størrelse)
41–44 (Medium)	8002	055039 (husk å oppgi størrelse)
45–49 (Large)	8002	051683 (husk å oppgi størrelse)



Albuebeskyttere



Albuebeskytteren brukes både til forebygging og behandling av trykksår.

Albuen pakkes enkelt inn i skinnet, der den får bevege seg fritt sammen med ullfibrene. Dermed oppstår minimal friksjon. Ved hjelp av den kraftige borrelåsen tilpasses størrelsen etter brukerens ønske og behov.

BESTILLINGSINFO:

Enhet: **Par**

Størrelse	Art.nr.	Hjelpemiddelnummer
One Size	8015	155074



Håndflatebeskytter



Et unikt trykkavlastende produkt for spastikere, revmatikere og dårlig sirkulerte brukere.

Håndflatebeskytteren gir varme og komfort, samtidig som den absorberer fuktighet og holder håndflaten tørr, noe som igjen kan motvirke sår.

BESTILLINGSINFO:

Enhet: **Stk**

Størrelse	Art.nr.	Hjelpemiddelnummer
One Size	8003	164419



Skinn (smalt)



Dette skinn brukes til forebygging og behandling av trykksår på blant annet hæler, hode, skuldre, bekken og sete.

Skinnet plasseres oppå madrassen, og strammes ved å stikke stoffendene (som er påsydd i hver ende av skinn) under madrassen. Skinnet er enkelt å forflytte.

BESTILLINGSINFO:

Enhet: **Stk**

Størrelse	Art.nr.	Hjelpemiddelnummer
30 x 70 cm	8001	152966



Overmadrass



Overmadrassen brukes til forebygging og behandling av trykksår, helt fra hodet og ned til hæler.

Overmadrassen plasseres enkelt oppå madrassen. Den er lun, varm og virker smertelindrende, slik at kroppen lettere får hvile. Leveres i flere størrelser.

BESTILLINGSINFO:

Enhet: Stk

Størrelse		Art.nr.	Hjelpemiddelnummer
75 x 125 cm	(Classic)	7985	155157
75 x 150 cm	(Superior)	8006	055033
75 x 180 cm	(Regal)	7983	173639
150 x 200 cm	(Queen)	7984	214099



Overmadrass (barn)



Overmadrassene brukes til forebygging og behandling av trykksår.

7988 er for premature barn. Kvalitetsskinnet hjelper til med å beholde barnets kroppstemperatur konstant, noe som igjen kan medføre økt kroppsvekt.

7987 er beregnet for barn som kommer til å være sengeliggende i lange perioder.

BESTILLINGSINFO:

Enhet: **Stk**

Størrelse		Art.nr.	Hjelpemiddelnummer
30 x 50 cm	(Baby)	7988	Ikke tilgjengelig
45 x 75 cm	(Barn)	7987	Ikke tilgjengelig



Omslagstøfler (kort)



Tøfler ideell til forebygging og behandling av trykksår på hele foten.

Egner seg både for de som sitter i rullestol, i godstolen, ligger i senga og for de som greier å spasere litt. Stor åpning i front gjør den lett å ta på og tilpasse. Holder brukeren tørr og varm på beina.

BESTILLINGSINFO:

Enhet: Par

Størrelse	Art.nr.	Hjelpemiddelnummer
35–36 (XX-Small)	7995	055052 (husk å oppgi størrelse)
37–38 (X-Small)	7995	055052 (husk å oppgi størrelse)
39–40 (Small)	7995	055052 (husk å oppgi størrelse)
41–42 (Medium)	7995	055052 (husk å oppgi størrelse)
43–44 (Large)	7995	055052 (husk å oppgi størrelse)
45–46 (X-Large)	7995	055052 (husk å oppgi størrelse)
47–49 (XX-Large)	7995	055052 (husk å oppgi størrelse)



Omslagstøfler (lang)



Tøflene er ideelle ved forebygging og behandling av trykksår på leggene.

Omslagstøflene kan åpnes helt opp, og er enkel å tilpasse ved hjelp av borrelåsene. Forebygger og heler leggsår. Kan brukes utenpå kompresjonsstrømper.

BESTILLINGSINFO:

Enhet: **Par**



Størrelse	Art.nr.	Hjelpemiddelnummer
One Size	7993	174066



Trykkmåling





Voksen persons fotsåler, stående på gulv i bare sokkelesten

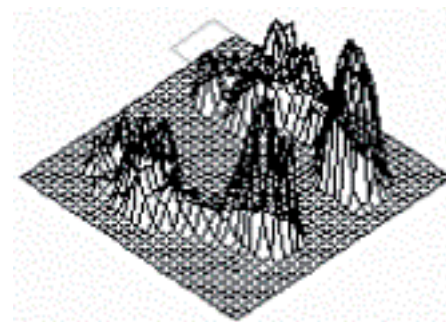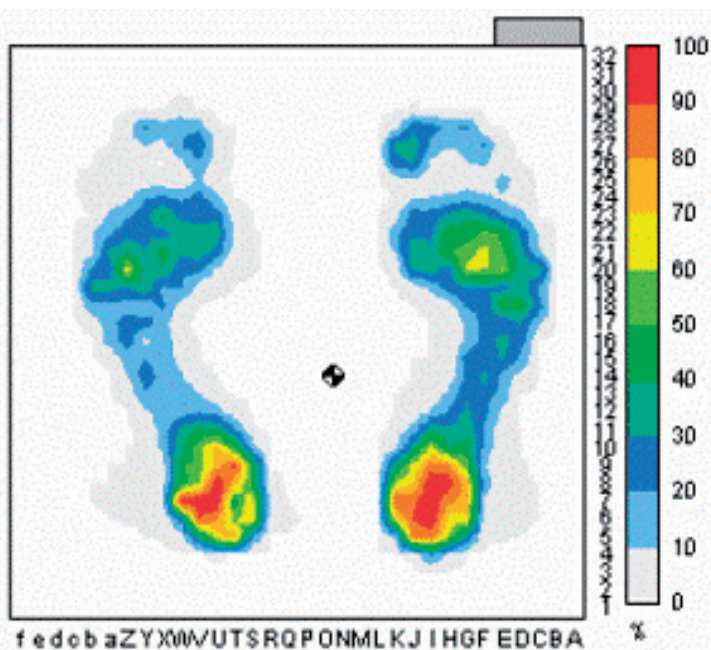

Antall sensorer:	586
Variasjon koeffisient:	148.0%
Standard deviasjon:	22
Gjennomsnitt trykk:	15
Maksimum trykk:	100
Sentrum av trykk:	14.5, 14.1

Voksen persons fotsåler, stående på gulv iført Lanapelle Omslagstøfler

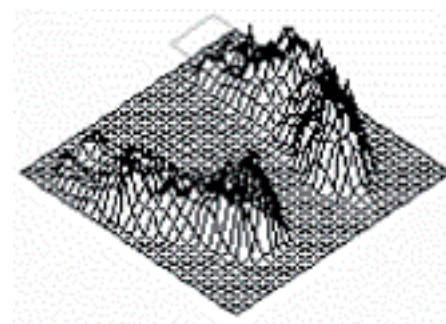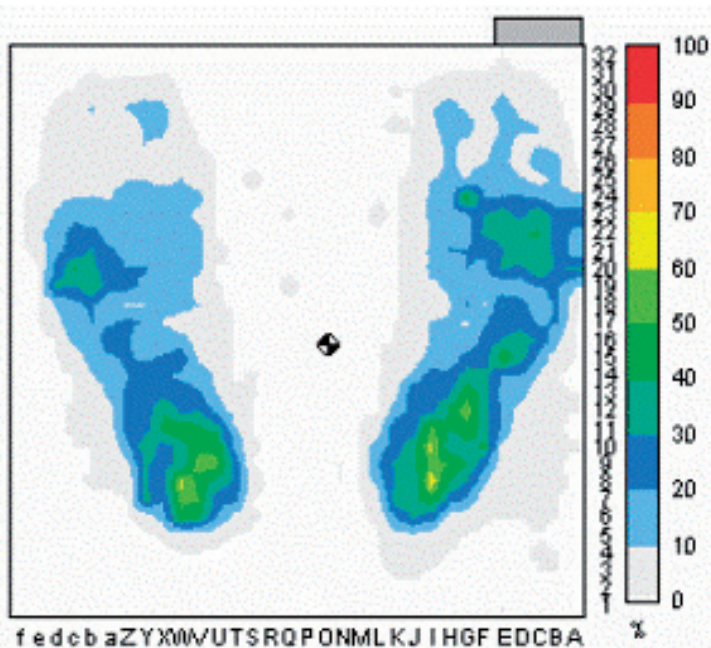

Antall sensorer:	718
Variasjon koeffisient:	119.9%
Standard deviasjon:	13
Gjennomsnitt trykk:	10.9
Maksimum trykk:	68
Sentrum av trykk:	14.8, 15.8

Produktinfo



VIKTIG INFORMASJON

Produktene skal vaskes med vaskemidler for ull og silke. Det anbefales Lanapelle Ullvask eller Milo. Tøymykner skal ikke benyttes, da den "spiser" ulla.

Det anbefales lufttørking framfor bruk av tørketrommel. Vær varsom dersom du likevel velger å bruke tørketrommel!

Lanapelle Australia garanterer for inntil 50 vask, så fremt vaskeanvisningen har blitt fulgt.

VASKEANVISNING



Normal vask ved maks 80°C og sentrifugering



Tåler ikke klorbleking og tøymykner



Tåler forsiktig tørketromling (lufttørking anbefales!)



Tåler rensing



Ikke stryking



OBS! Denne vaskeanvisningen gjelder kun for vanlige vaskemaskiner (ikke industrivask)



www.lanapelle.no


TENDENZ
VELVÆRE



913 10 878



postmottak@tendenz.no

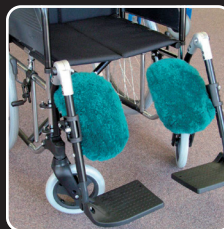

TENDENZ
VELVÆRE

Vestre Porsangerveien 2512
9710 Indre Billefjord

Tlf.: 913 10 878
postmottak@tendenz.no

www.lanapelle.no