



Molift Mover 180

Lett og kompakt løfter for hjemmepleien og institusjon

Enkel å manøvrere

Molift Mover 180 har en lett aluminiumskonstruksjon som gjør den meget enkel å manøvrere. 100 mm hjul gir økt stabilitet og brukervennlighet på ujevne underlag.

Komfortabel forflytning

Løftebøylens 4 punkts utforming gir bruker god plass. Brukt i kombinasjon med seilets unike glideløkker gir dette en stabil og komfortabel forflytning.

Molift Mover 180 har stort løfteintervall og kan løfte fra gulv.



molift®



Håndkontroll

Robust og vaskbar (IPX6) med indikatorer for batterinivå, overbelastning og service.



Unikt kjørehåndtak

Det unike kjørehåndtaket har mange grepsmuligheter, gir naturlige grep og god ergonomi.



Lett å manøvrere

Lett og kompakt design gjør det meget enkelt å manøvrere løfteren.

Egenskaper

Ergonomisk utforming

Molift Mover 180 er utstyrt med Molifts unike kjørehåndtak som gir fleksible grepsmuligheter og bedre ergonomi for pleiepersonell.

Forventet levetid

Løfteren har, ved normal og tilsiktet bruk, en forventet levetid på 30 000 løftesykluser eller 15 år, avhengig av hva som inntreffer først.

Batteri

Lithium-Ion batteriet har et forseglet design og er vaskbart (IPX6). Batteriet veier kun 0,9 kg og kan byttes ut med ethåndsgrep.

Batteriet kan lades direkte på løfteren. Ekstern lader kan fås som tilbehør. Ladetiden er kun 3,5 timer. Når batteriet er fulladet, gir det opptil 160 løft ved 75 kg per løft, og det er kompatibelt med alle Molifts passive mobile personløftere.

Batteriet har en forventet levetid, ved normal og tilsiktet bruk, på 1 700 ladesykluser.

Speed boost

Funksjonen for hastighetsøkning gjør det mulig å øke løftehastigheten når aktuatoren ikke er belastet. Dette sparer tid i hverdagen.

Håndkontroll

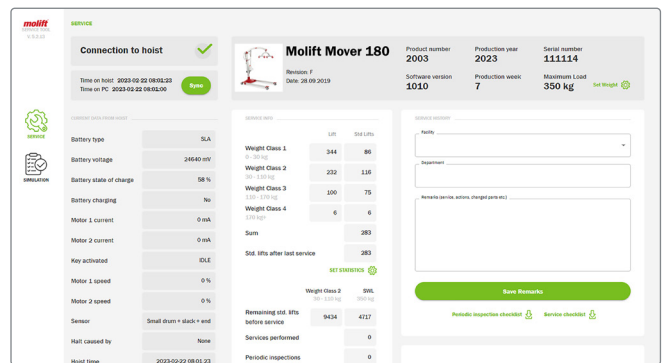
Håndkontrollen er robust og velprøvd. Den har indikatorer for batterinivå, overbelastning og service, som sikrer optimal ytelse og sikkerhet.






Håndkontrollen er designet for lang levetid. Skulle man være uheldig å få en skade på kabelen, kan man enkelt bytte denne, uten at selve håndkontrollen må byttes. Håndkontrollen er vaskbar (IPX6).

Molift Service Tool

Molift Mover 180, som alle Molift-løftere, er utstyrt med et unikt servicevarslingssystem som gir beskjed når det er behov for service. Den integrerte serviceprogramvaren viser data om bruk av løfteren, løftemønstre og informasjon for feilsøking.




I tillegg er løfteren utstyrt med Bluetooth-tilkobling som muliggjør trådløs tilkobling til Molift Service Tool.



Produkt	HMS nr.	Art .nr.	Mål forts.	
Molift Mover 180, 100mm hjul, 4-pkt løftebøyle M*	329914	M1802-02*	Løftehøyde min-maks m/4-punkt løftebøyle, 100mm hjul*	300 - 1660 mm
Molift Mover 180, 75mm hjul, 4-pkt. løftebøyle M		M1801-4PM	Løftehøyde min-maks m/4-punkt løftebøyle, 75mm hjul	265 - 1630 mm
Molift Mover 180, 100mm hjul, 4-pkt løftebøyle L		M1802-4PL	Utvendig bredde med samlede ben	670 mm
Molift Mover 180, 75mm hjul, 4-pkt. løftebøyle L		M1801-4PL	Utvendig mål med åpne ben	1145 mm
* Prisforhandlet med Nav			Innvendig bredde med samlede ben	555 mm
			Innvendig bredde med åpne ben	1025 mm
Materiale			Teknisk informasjon	
Aluminium, stål, plast			Batteri	Li-Ion 25.2V, 2.85Ah
Vekt			Ladetid batteri	3.5 time
Maks brukervekt (SWL)		180 kg	Løftehastighet	46 mm/sek
Vekt produkt		36 kg	Antall løft m/fulladet batteri	160 løft/75 kg
Mål			Rengjøring	
Høyde		1940 mm	Rengjør / desinfiser produktet ved bruk av løsemiddelfritt rengjøringsmiddel med pH mellom 5 og 9, eller med 70% desinfeksjonsmiddel	
Lengde		1260 mm		
Høyde ben		105/140* mm (75/100* mm hjul)		
Hjul størrelse		75/100* mm		
Løfteintervall		1365 mm		
				
				

For mer informasjon om våre produkter og løsninger, se etac.no

Etac AS

-  815 69 469
-  hovedkontor.norge@etac.com
-  www.etac.no